

完璧な' はいち君。

端末配置編
操作マニュアル

商標登録 第6081972号
特許番号 第6515415号

2023年12月版

コスモシステム株式会社

目 次

はじめに	3
1. ショートカット作成	4
2. ログイン(起動)方法	5
3. 端末配置	6
4. 部署名登録、図面取込み	7
5. ルーム	11
6. アイコンプロット	15
7. コメント	21
8. 図面印刷・図面出力	23
9. 一覧表示	25
10. アイコンロック	28
11. 図面・ルーム・アイコン削除	30
12. 棚卸管理	33
13. 棚卸表	38
14. フロア図面	40
15. その他	42

はじめに

概 要

「完璧な’はいち君。」は、図面をスキャナまたは加工された図面のファイル（JPEGなど）を読み込み、その図面にたいし、機器アイコン（パソコン、プリンター、スキャナー、医療機器、備品（机、白板）など）をプロットし、その位置を自動的に記録できます。

図面のルームを切り取り、ルームに対して名前をつけることでルームごとの端末一覧が印刷できます。

情報機器、医療機器、備品などの図面への配置、部署ごとに資産情報、棚卸し情報が簡単に把握できるシステムです。

代表的な機能一覧

1. アイコン管理			
(1) 図面（部署）登録機能	(2) アイコン設定機能	(3) ルーム登録機能	
・画面分割/登録	・アイコンプロット	・ルーム切り取り	
・図面選択	・アイコン微調整	・ルーム保守	
・部署保守	・アイコン複写	・ルーム削除	
・ロック解除	・アイコン削除	・ルーム一括削除	
	・アイコンロック		
	・アイコン一括削除		
	・詳細入力		
	※アイコン = 端末アイコン		
2. 印刷機能			
(1) 図面（部署）印刷	(2) 図面（部署）一覧	(3) フロア一覧	(4) 端末一覧
		・部署別フロア一覧	・部署別端末種別台数一覧
		・部署別フロア別端末一覧	・端末種別部署別台数一覧
3. 保守管理（試用版にこの機能はありません）			
(1) 名称マスタ登録機能	(2) 設定マスタ登録機能	(3) 外部連携(オプション)	
・部署別、フロア名、端末名	・アイコン色、大きさ、種別設定	・利用者連携	
	・部署別アイコン種別設定		
4. 資産管理（試用版にこの機能はありません）			
(1) 資産情報登録機能	(2) RFIDタグ管理機能		
・取得日・価格、耐用年数	・RFIDタグ設定		
・設置日、設置台数など	※入力と同時に図面上のアイコンを点滅(強調)させる。		


1. ショートカット作成

1-1 アプリケーション「Deviceinst.exe」を起動します。


名前	更新日時	種類	サイズ
DevArrangeConfig	2023/02/16 12:10	ファイル フォルダー	
DevArrangeDiagram	2023/02/16 12:10	ファイル フォルダー	
DevArrangeExcel	2023/02/16 12:10	ファイル フォルダー	
DevArrangeExcelOutput	2023/02/16 12:10	ファイル フォルダー	
DevArrangeJpeg	2023/02/16 12:10	ファイル フォルダー	
DevArrangeJpegInput	2023/02/16 12:10	ファイル フォルダー	
DevArrangeJpegOutput	2023/02/16 12:10	ファイル フォルダー	
DevArrangeLocation	2023/02/16 12:10	ファイル フォルダー	
DevArrangeManual	2023/02/16 12:11	ファイル フォルダー	
DevArrangeProgram	2023/02/16 12:12	ファイル フォルダー	
DEFAULT.ini	2022/11/13 11:29	構成設定	2 KB
Deviceinst.exe	2021/03/15 14:15	アプリケーション	37 KB
PH-dbAssets.mdb	2023/02/16 12:16	Microsoft Access ...	4,036 KB
PH-Key.ini	2023/01/31 10:10	構成設定	1 KB

1-1-(1) 「ショートカット作成」をクリックします。

※デフォルトはデスクトップに作成される。変更したい場合は「フォルダ変更」をクリックする。

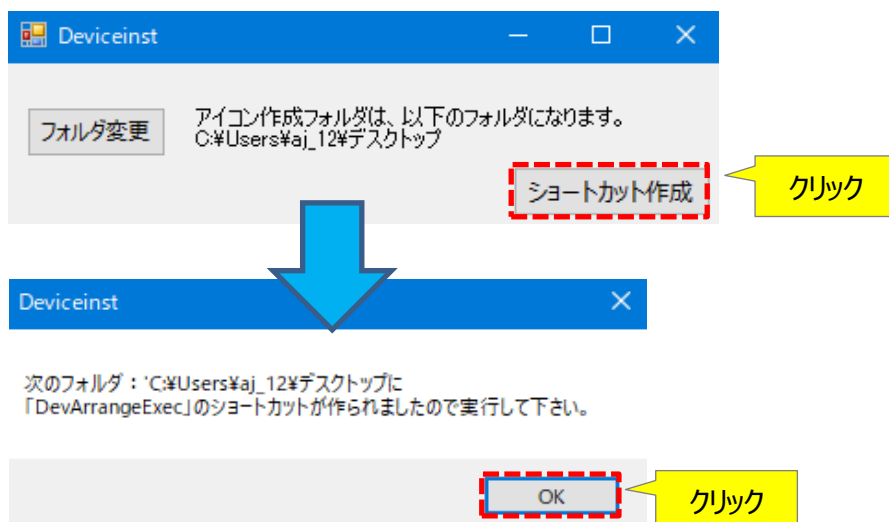


1-1-(2) デスクトップに『完璧な』はいち君。』のショートカットが作成されます。

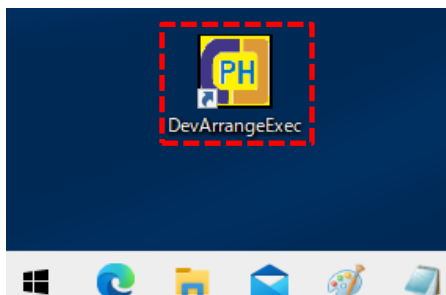

2. ログイン（起動）方法

2-1 アイコン（「DevArrangeExec」）をダブルクリックします。

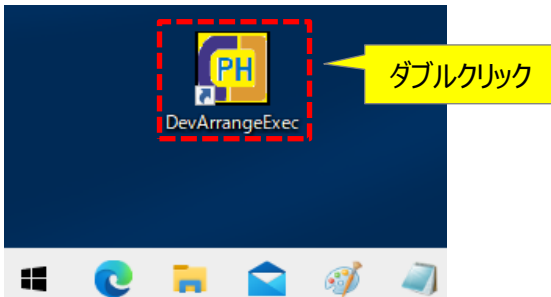


2-1-(1) 起動準備中の画面が表示されます。



2-1-(2) メニュー画面・利用者画面が表示されるので利用者IDとパスワードを入力します。

※利用者：99999 パスワード：P99

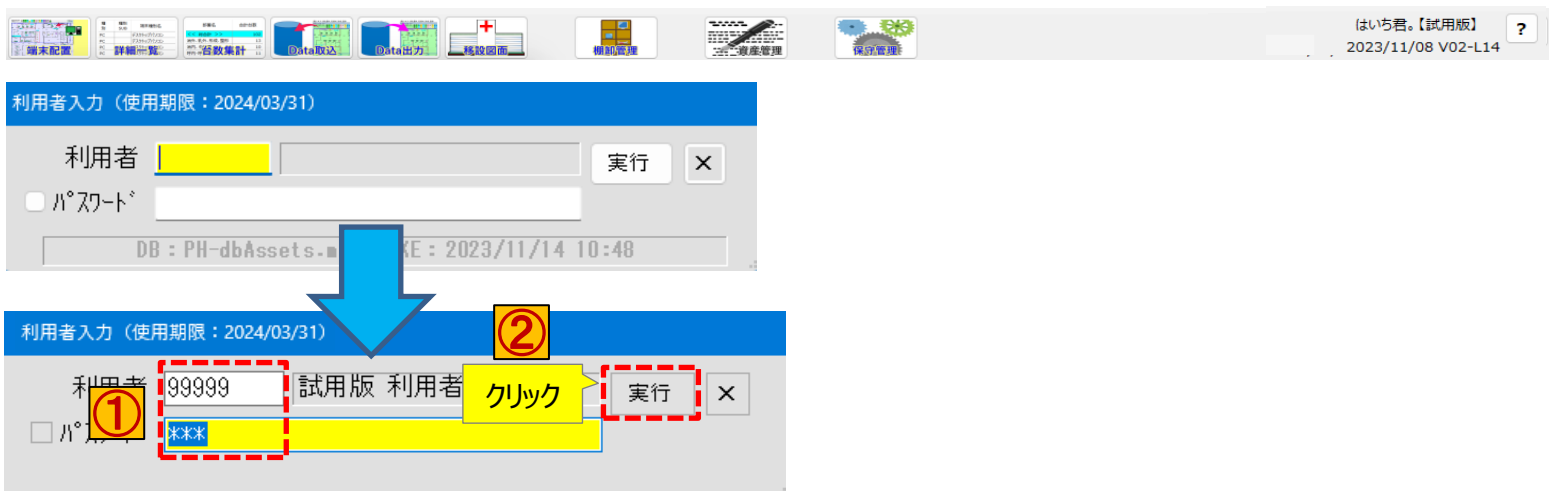

2-1-(3) 入力した利用者名でログインできます。

※使用期限については、ダウンロードした時期で異なります。



3. 端末配置

3-1 端末配置の初期画面について説明します。

端末配置 (〇〇〇記念病院)

前の棟 中央棟 1 階 中央棟 2 階 次の棟

	Lock	J-コード	部署名	表示順	図面名称	部署KB	排他状況	操作端末
1		1101	消化器外科、乳腺外科	1101	¥Diagram-1101.jpg	11		LAPTOP-BFKPA4AP
2		1102	消化器内科、中央処置室	1102	¥Diagram-1102.jpg	11		LAPTOP-BFKPA4AP
3		1103	呼吸内科・外科、血液内科	1103	¥Diagram-1103.jpg	11		MyComputer
4		1104	受付、医事科、がん相談室	1104	¥Diagram-1104.jpg	11		MyComputer
5		1105	泌尿器科、処置治療室	1105	¥Diagram-1105.jpg	11		MyComputer
6		1106	内視鏡、気管支鏡、撮影室	1106	¥Diagram-1106.jpg	11		MyComputer
7		1107	頭頸部、緩和ケア、婦人科	1107	¥Diagram-1107.jpg	11		MyComputer
8		1108	総合案内	1108	¥Diagram-1108.jpg	11		MyComputer
9		1109	形成外科、整形外科	1109	¥Diagram-1109.jpg	11		MyComputer

《詳細説明》

① 部署選択

部署の選択ができる。

「消化器外科、乳腺外科」が選択された。

② フロア(階)選択タブ

フロア(階)の選択ができる。

中央棟 1 階 中央棟 2 階

	Lock	J-コード	部署名
1		1101	消化器外科、乳腺外科
2		1102	消化器内科、中央処置室
3		1103	呼吸内科・外科、血液内科

	Lock	J-コード	部署名
1		1201	MEセンター
2		1202	MEセンター (棚)
3		1203	

③ 前の棟選択

前の棟の選択ができる。

④ 次の棟選択

次の棟の選択ができる。

⑤ 部署一覧表示欄

部署一覧としてLock、コード、部署名、表示順、図面名称、部署KB、排他状況、操作端末を表示する。

⑥ 各印刷 (図面印刷、図面出力)

図面印刷 (PDF出力可)、図面出力 (PNG、Excel出力) の印刷・出力ができる。

⑦ × (終了)

終了する。

4. 部署名登録、図面取込み

4-1 部署を右クリックすることで部署変更ができます。

端末配置（架空の施設）

前の棟 中央棟 1 階 中央棟 2 階 次の棟

	Lock	コード	部署名	表示順	図面名称	部署KB	排他状況	操作端末
▶ 1		1101	消化器外科、乳腺外科	1101	¥Diagram-1101.jpg	11		MyComputer
2		1102	消化器内科、中央処置室	1102	¥Diagram-1102.jpg	11		MyComputer
3		1103	呼吸内科・外科、血液内科	1103	¥Diagram-1103.jpg	11		MyComputer
4		1104	受付、医事科、がん相談室	1104	¥Diagram-1104.jpg	11		MyComputer
5		1105	泌尿器科、処置治療室	1105	¥Diagram-1105.jpg	11		MyComputer
6		1106	内視鏡、気管支鏡、撮影室	1106	¥Diagram-1106.jpg	11		MyComputer
7		1107	頭頸部、緩和ケア、婦人科	1107	¥Diagram-1107.jpg	11		MyComputer
8		1108	総合案内	1108	¥Diagram-1108.jpg	11		MyComputer
9		1109	形成外科、整形外科	1109	¥Diagram-1109.jpg	11		MyComputer
10		1110				11		MyComputer

① 右クリック

② 部署変更を選択

部署変更

Lock解除
ReadOnly解除
行クリア

部署名変更

確定 ×

① 黄色のセル欄を入力

② クリック

マスタ項目名	
部署Lock	
部署コード	1110
部署名	テスト
略称 1	テスト
略称 2	テスト
略称 3	テスト
表示順	1110
図面アドレス	
備考	
登録日付	
登録ID	
登録端末	
修正日付	2023/03/27 16:12:05
修正ID	99999
修正端末	MyComputer

4-2 部署をダブルクリックすることで部署を開くことができます。


端末配置（架空の施設）

前の棟 中央棟 1 階 中央棟 2 階 次の棟

	Lock	コード	部署名	表示順	図面名称	部署KB	排他状況	操作端末
▶ 1		1101	消化器外科、乳腺外科	1101	¥Diagram-1101.jpg	11		MyComputer
2		1102	消化器内科、中央処置室	1102	¥Diagram-1102.jpg	11		MyComputer
3		1103	呼吸内科・外科、血液内科	1103	¥Diagram-1103.jpg	11		MyComputer
4		1104	受付、医事科、がん相談室	1104	¥Diagram-1104.jpg	11		MyComputer
5		1105	泌尿器科、処置治療室	1105	¥Diagram-1105.jpg	11		MyComputer
6		1106	内視鏡、気管支鏡、撮影室	1106	¥Diagram-1106.jpg	11		MyComputer
7		1107	頭頸部、緩和ケア、婦人科	1107	¥Diagram-1107.jpg	11		MyComputer
8		1108	総合案内	1108	¥Diagram-1108.jpg	11		MyComputer
9		1109	形成外科、整形外科	1109	¥Diagram-1109.jpg	11		MyComputer
10		1110	テスト	1110		11		MyComputer


ダブルクリック

4-2-(1) 図面取込(JPEG形式)ボタンをクリックします。

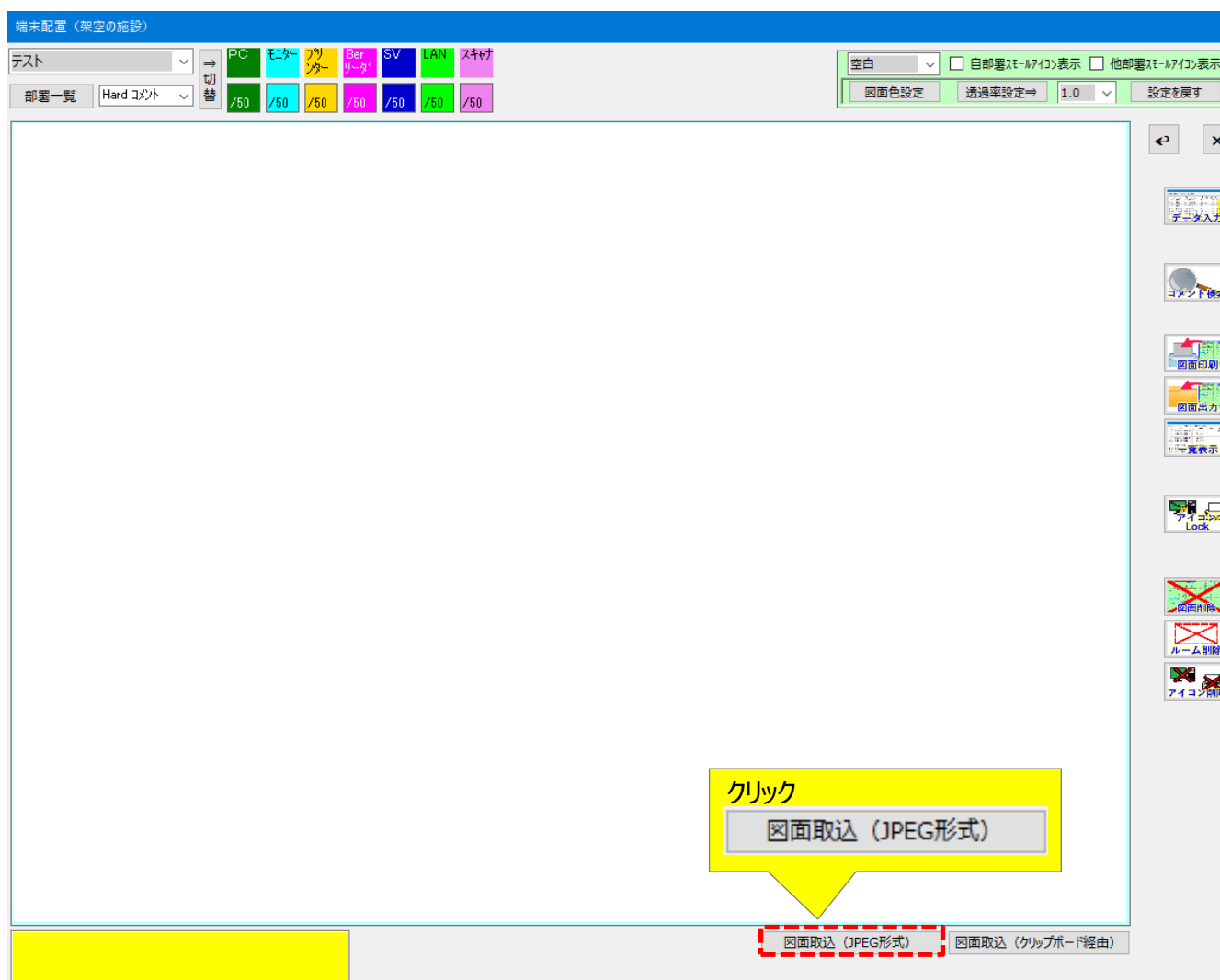


4-2-(2) 画像選択画面が表示されるので、図面を選択します。



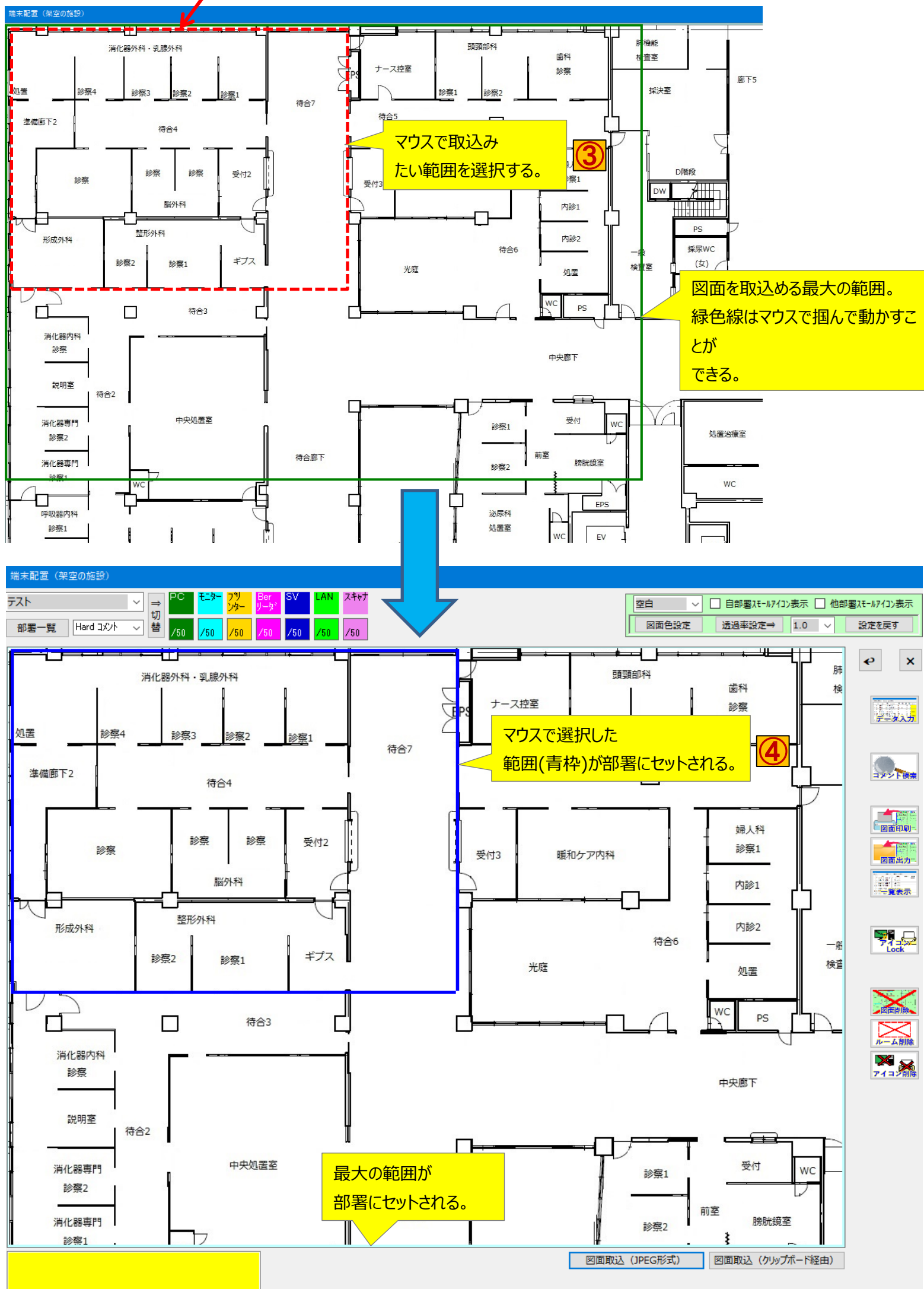


4-3 図面取込(クリップボード経由)の場合、事前にほかのツール (ペイント、EXCEL、PDF) でコピーした図面を取り込むことができます。

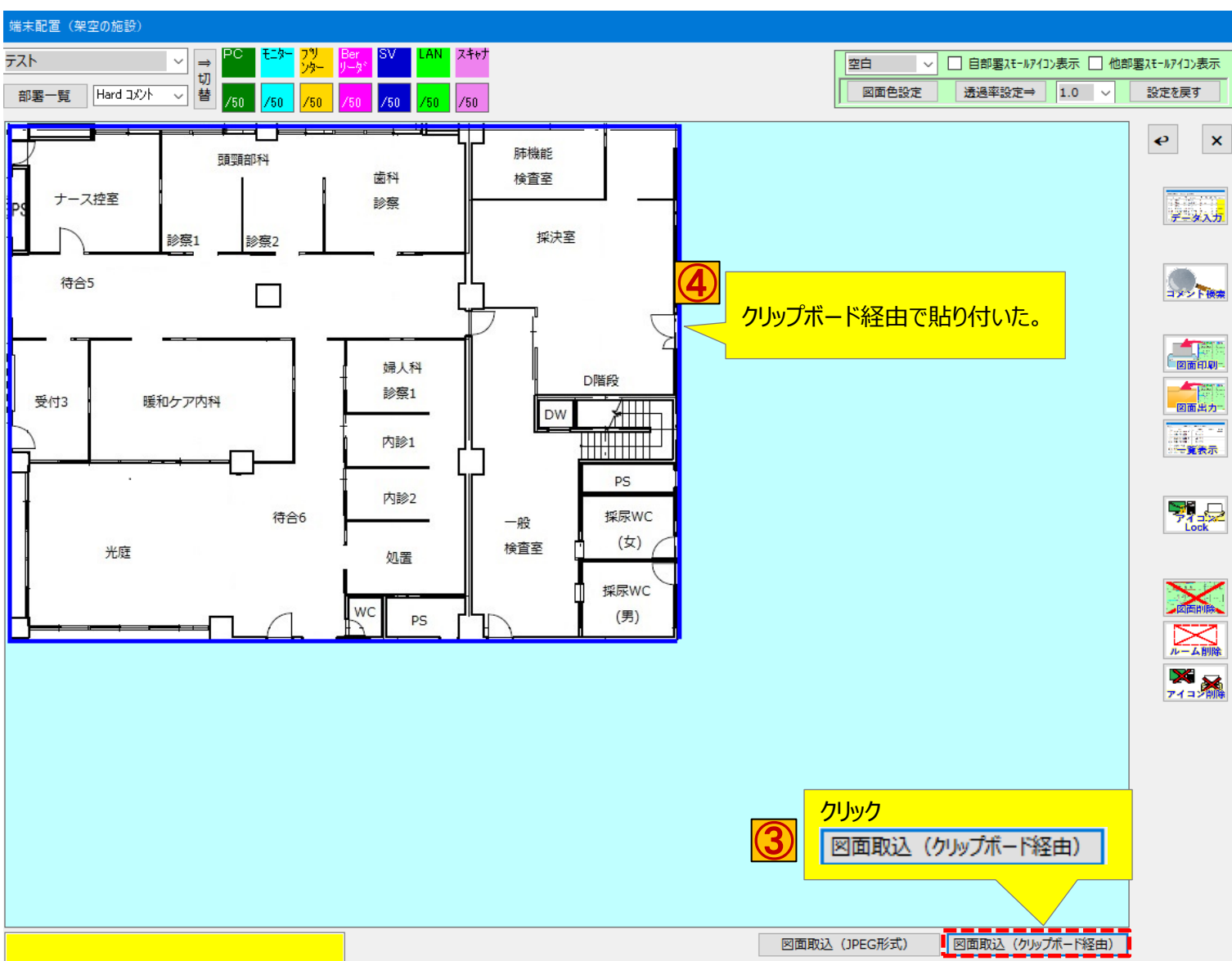

5. ルーム

5-1 ルーム作成及びルーム名登録ができます。
※ルームは、99カ所まで設定可能

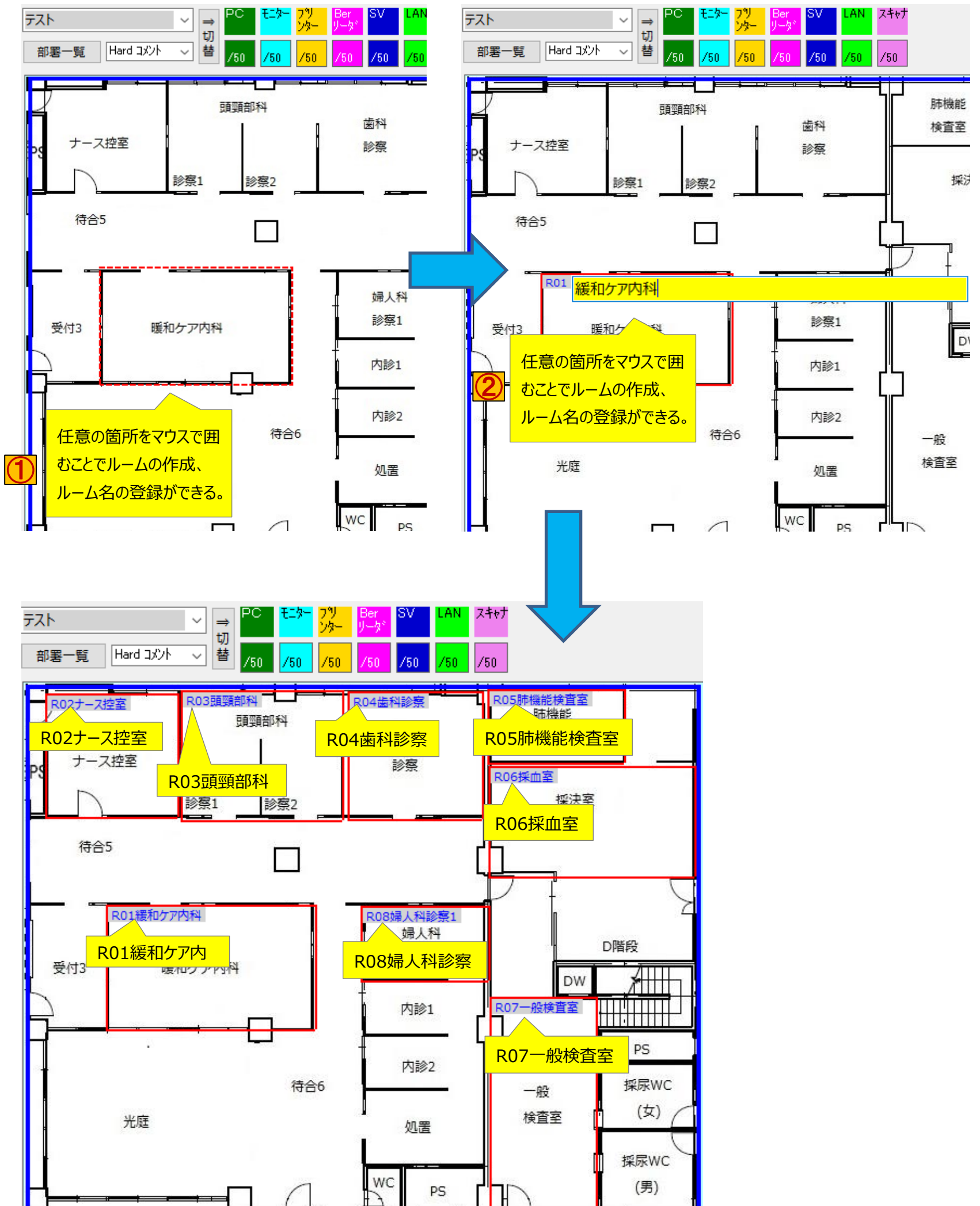

5-1-(1) ルーム名を右クリックすることでルーム名及び備考の修正ができます。

端末配置（架空の施設）

テスト ▼ ⇒ 切替

部署一覧 Hard コント ▼

PC モニター フリッカー Ber リーダー SV LAN スキャナ

/50 /50 /50 /50 /50 /50 /50

R02ナース控室 R03頭頸部科 R04歯科診療 R05肺機能検査室

修正したいルーム名を右クリックしてルーム変更を選択

ルーム変更
ルーム複写
ルーム削除
ルーム・アイコン削除

ルーム名変更

ルーム名を修正して確定

確定 X

マスタ項目名	項目設定値
部署コード	1110
ルームコード	R01
ルーム名	緩和ケア内科 → 修正
左位置	81
右位置	274
幅	193
上位置	280
下位置	395
高さ	115
備考	
予備1	81
予備2	280
予備3	

光庭 待合6 内診2 処置 WC PS 一般検査室 採尿WC (女) 採尿WC (男)

端末配置（架空の施設）

テスト ▼ ⇒ 切替

部署一覧 Hard コント ▼

PC モニター フリッカー Ber リーダー SV LAN スキャナ

/50 /50 /50 /50 /50 /50 /50

R02ナース控室 R03頭頸部科 R04歯科診療 R05肺機能検査室

ルーム名、備考が修正される

R06採血室 採決室

R01緩和ケア内科 → 修正

R08婦人科診療1 婦人科 診察1


内診1 内診2 処置 WC PS 一般検査室 採尿WC (女) 採尿WC (男)

受付3 待合5 待合6 光庭



D階段 DW PS

5-1-(2) ルーム名を右クリックすることでルーム名情報の削除ができます。

※削除されたルームNoは再利用される。

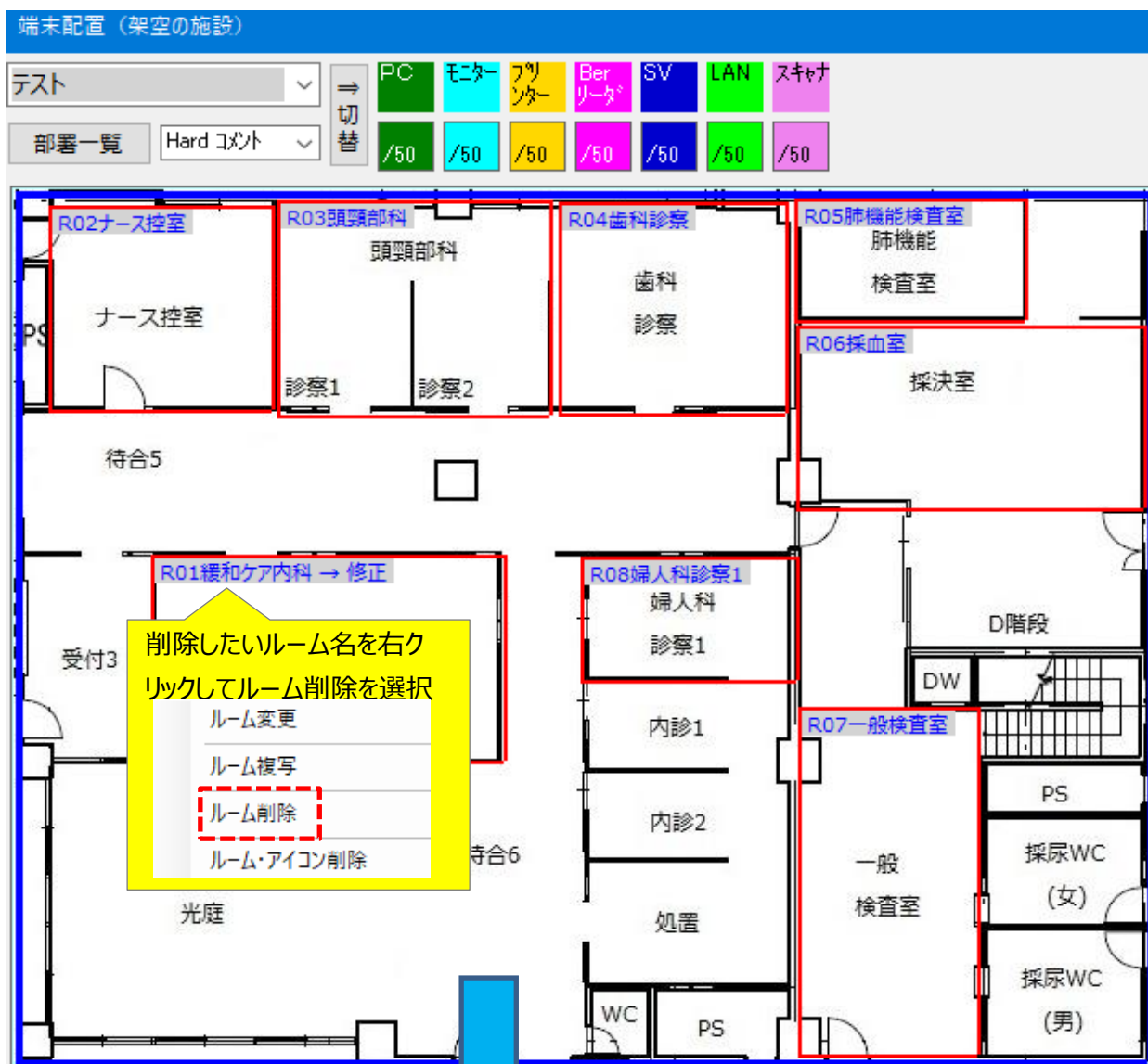


5-1-(3) ルーム名を右クリックすることでルームとルームに所属しているアイコンを同時に削除できます。

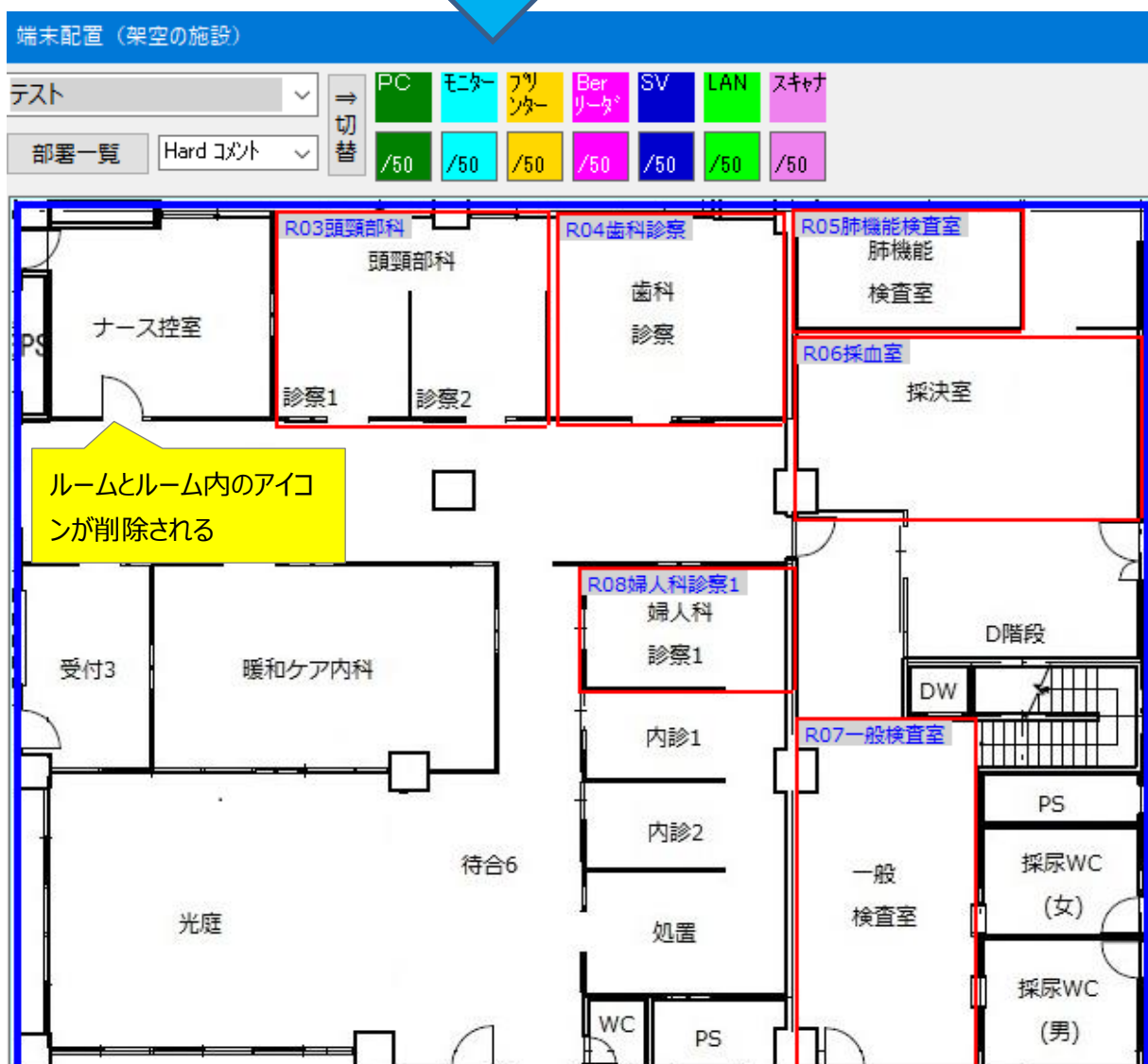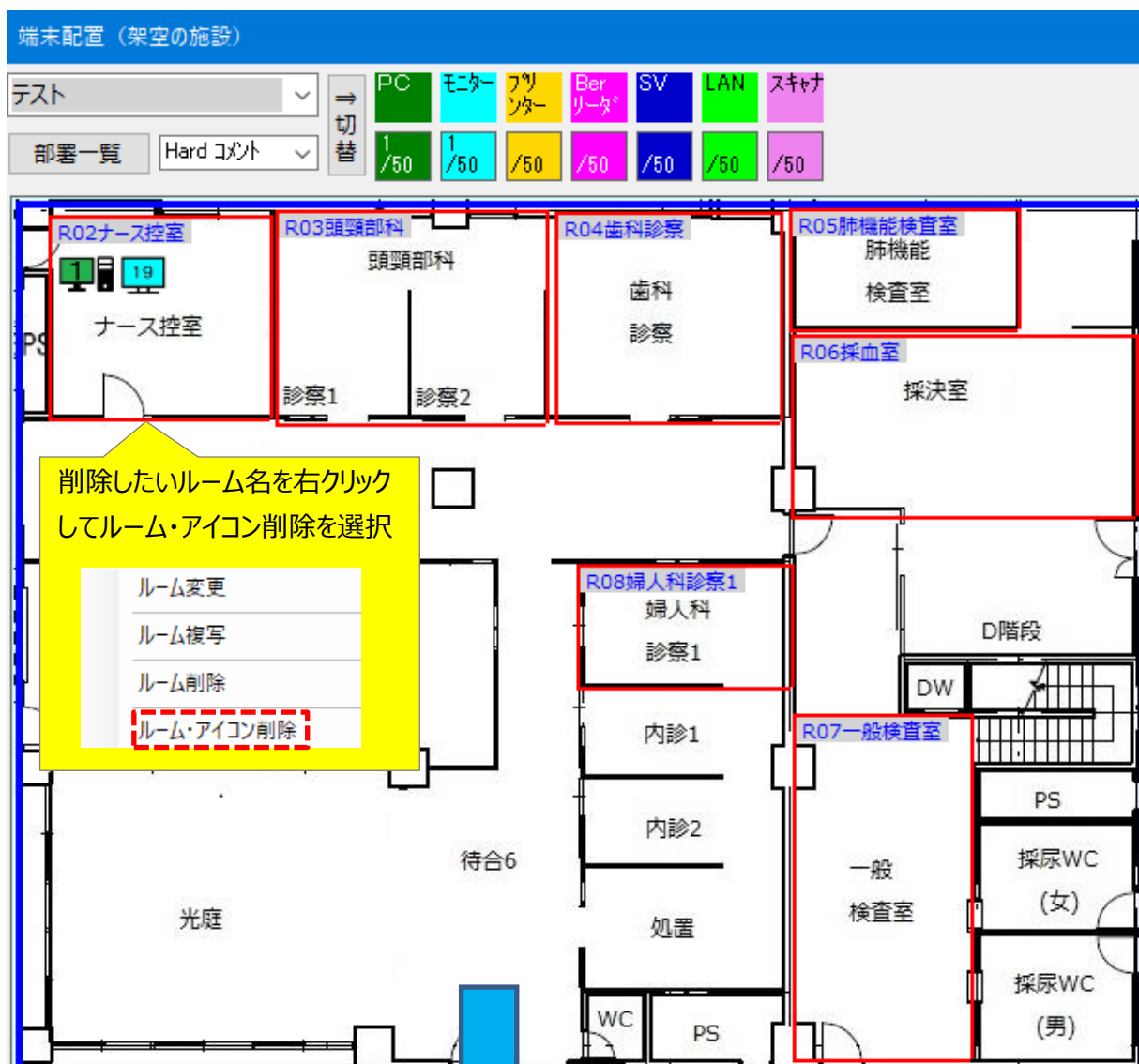

6. アイコンプロット

6-1 マウสดラッグ&ドロップで図面上の任意の場所(青枠内)にアイコンをプロットすることができます。

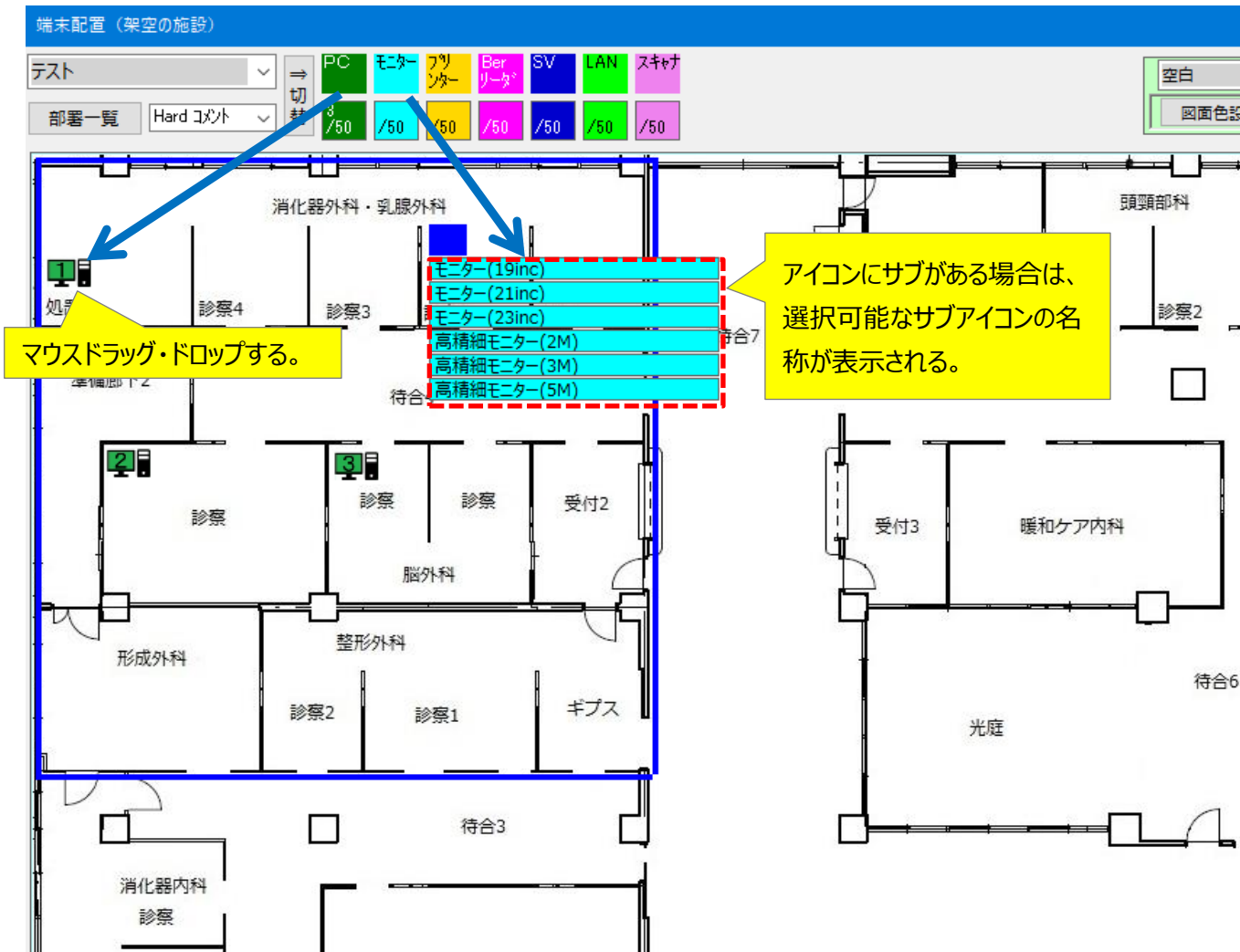

6-2 アイコンを右クリックすることで「複写・移動・フロア図面・削除・詳細入力・微調整・完全調整」ができます。



詳細入力（端末情報の詳細）

基本 配置設定 資料

エンドユーザが設定
できる項目

保存 ×

ホスト名	<input type="text"/>	MACアドレス	<input type="text"/>
IPコード	<input type="text"/>	設置日付	<input type="text"/>
IPアドレス	<input type="text"/>	備考	<input type="text"/>
サブネットマスク	<input type="text"/>	端末区分	<input type="text"/>
デフォルトゲートウェイ	<input type="text"/>	棚卸区分	<input type="text"/>
機器種別	<input type="text"/>	インターネット利用区分	<input type="text"/>
メーカー名	<input type="text"/>	棚卸アップロード対象	<input type="text"/>
機器名(器械名)	<input type="text"/>	棚卸データ反映用	<input type="text"/>
設置場所フロア	<input type="text"/>		
設置場所	<input type="text"/>		
資産番号	<input type="text"/>		

詳細入力（端末情報の詳細）

基本 配置設定 資料

アイコンが配置された時の
情報（変更不可）

保存 ×

コード	10007767		
部署コード	1107	南側	
部屋コード			
端末種別	PC	備考	<input type="text"/>
端末SUB種別		補足	<input type="text"/>
端末コード	0100	その他	10007767 Green White デスク PC 9 22 31 PC デスクトップパソコン 5 205
端末種別名	デスクトップパソコン	備考位置	<input type="text"/>
アイコンTop	179		
アイコン高さ	199		
アイコンLeft	355		
アイコン幅	386		

詳細入力（端末情報の詳細）


基本 配置設定 資料



画像・Webアドレスなどの




保存 ×

端末画像	<input type="text"/>	資料(Web)	<input type="text"/>
			



<端末種別の構成>

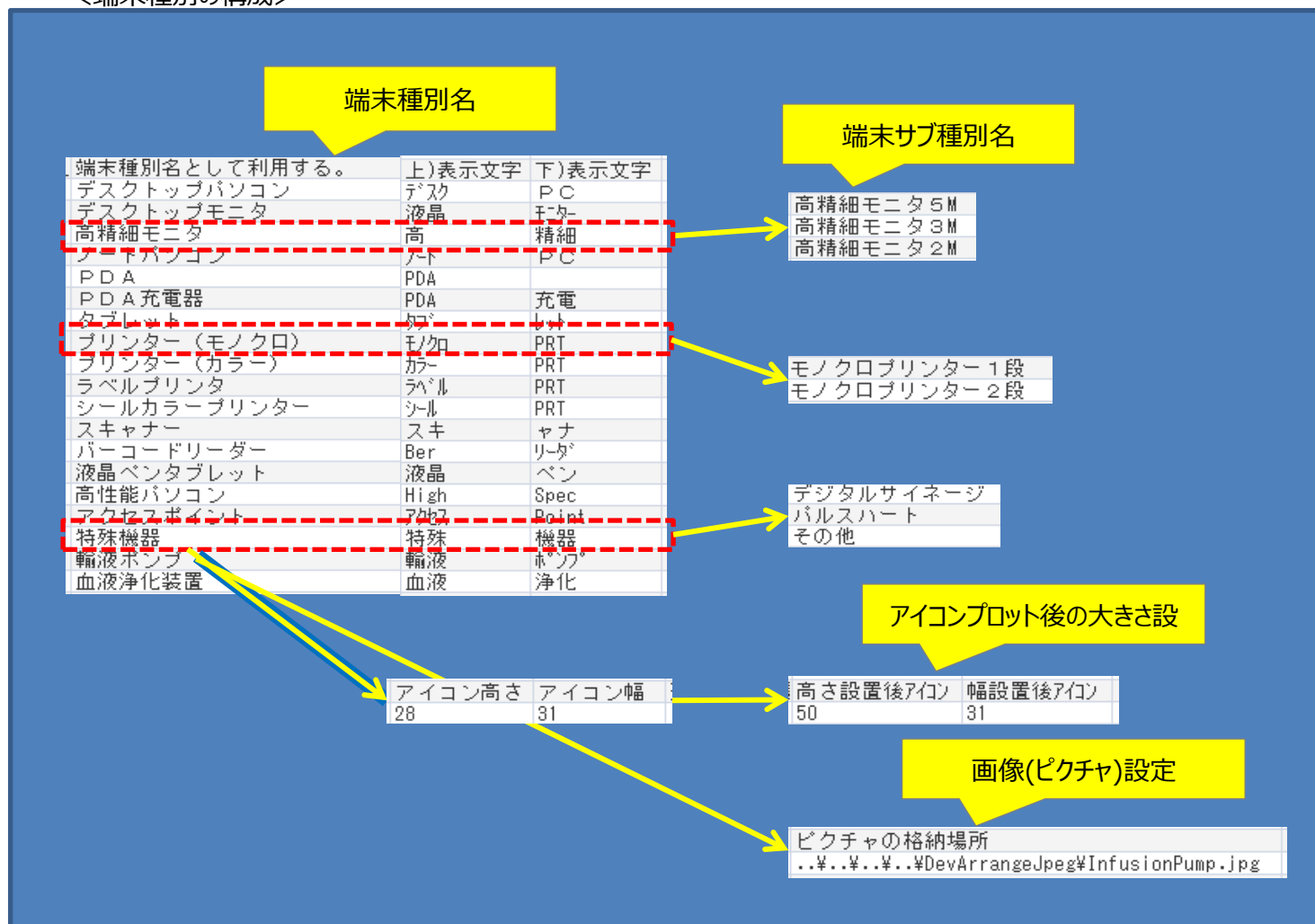

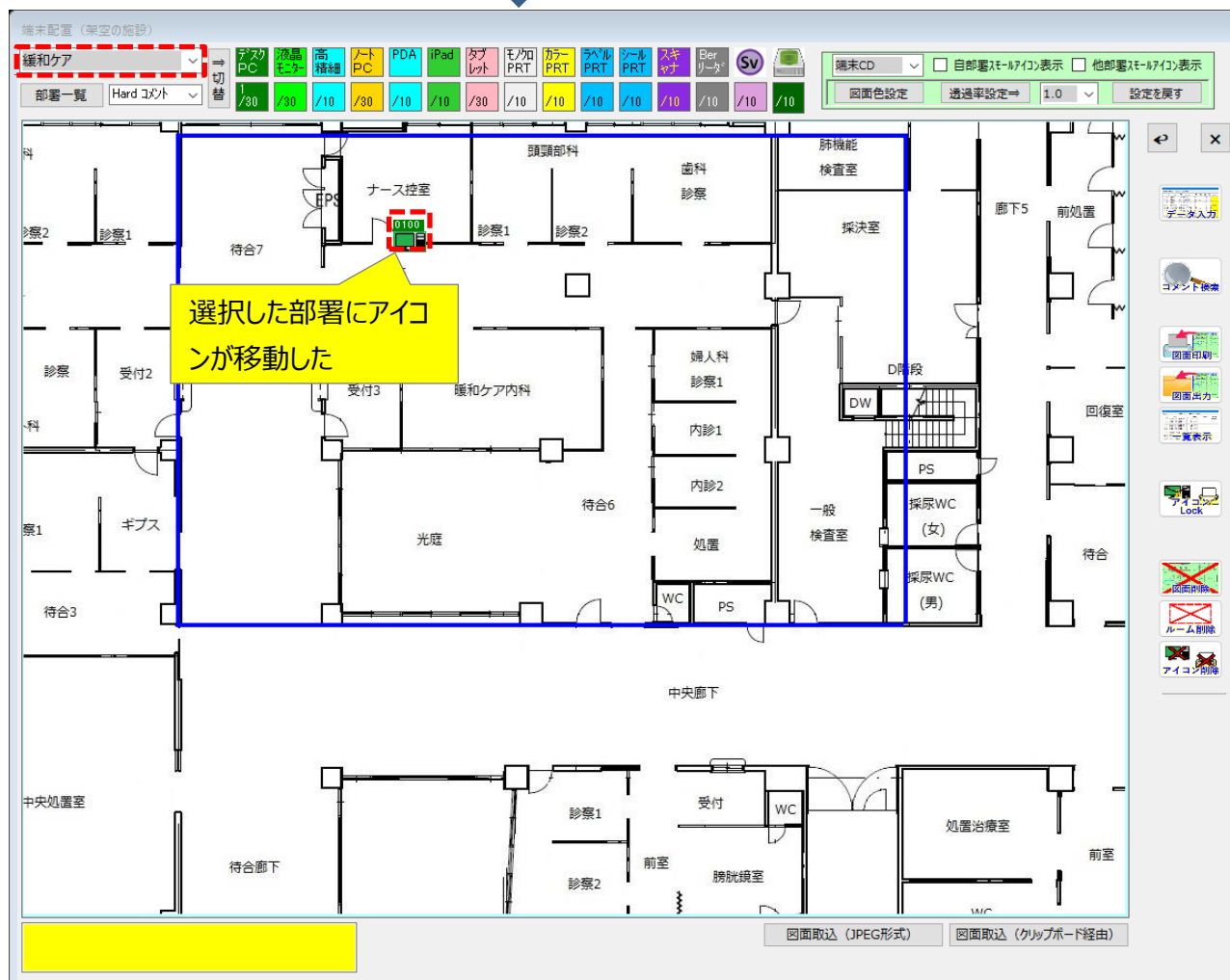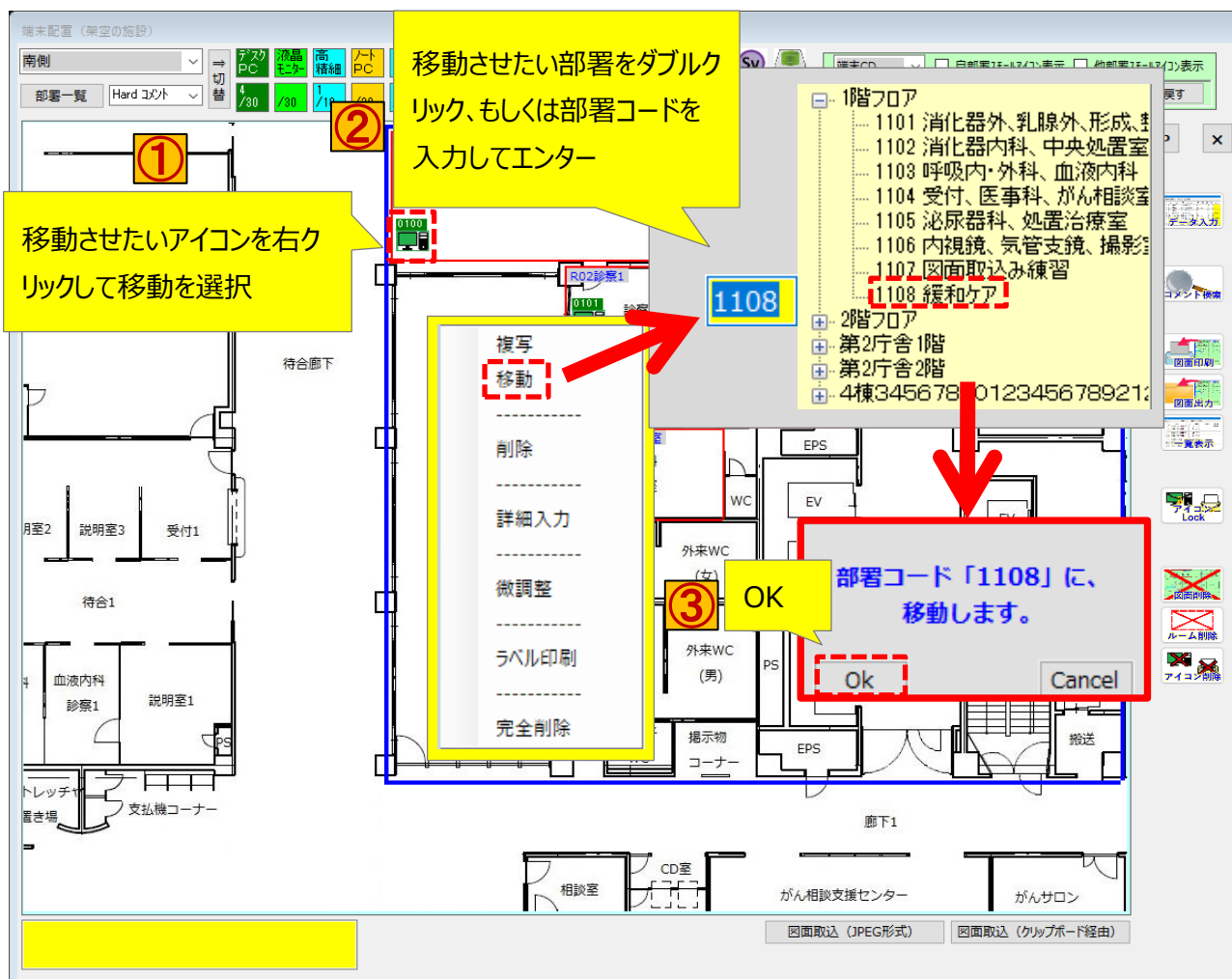

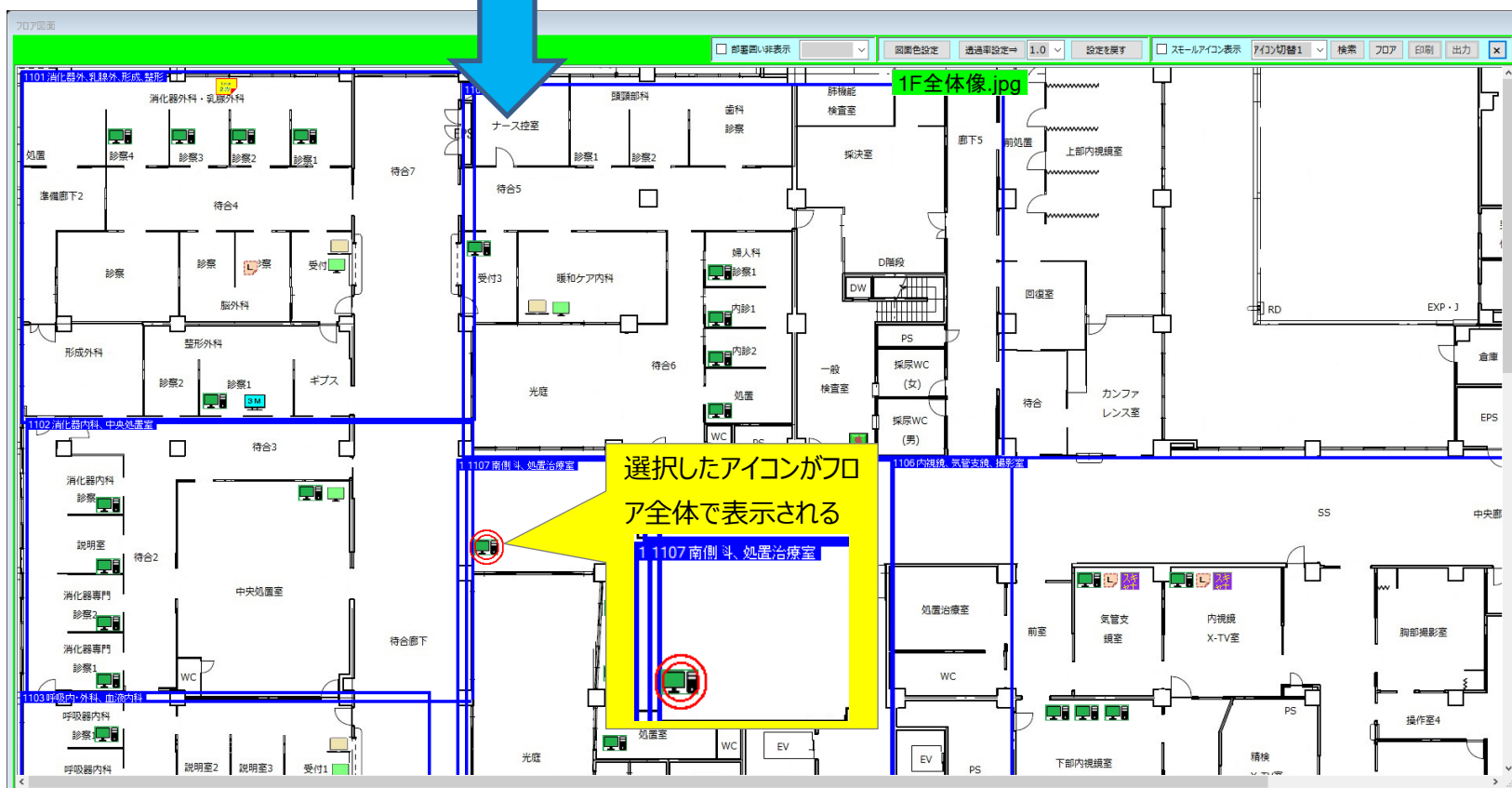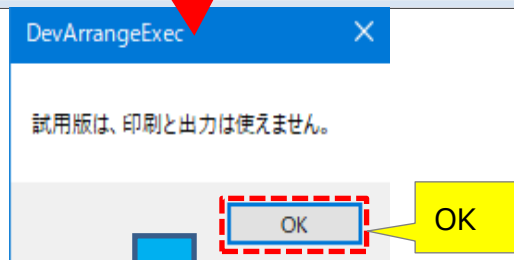
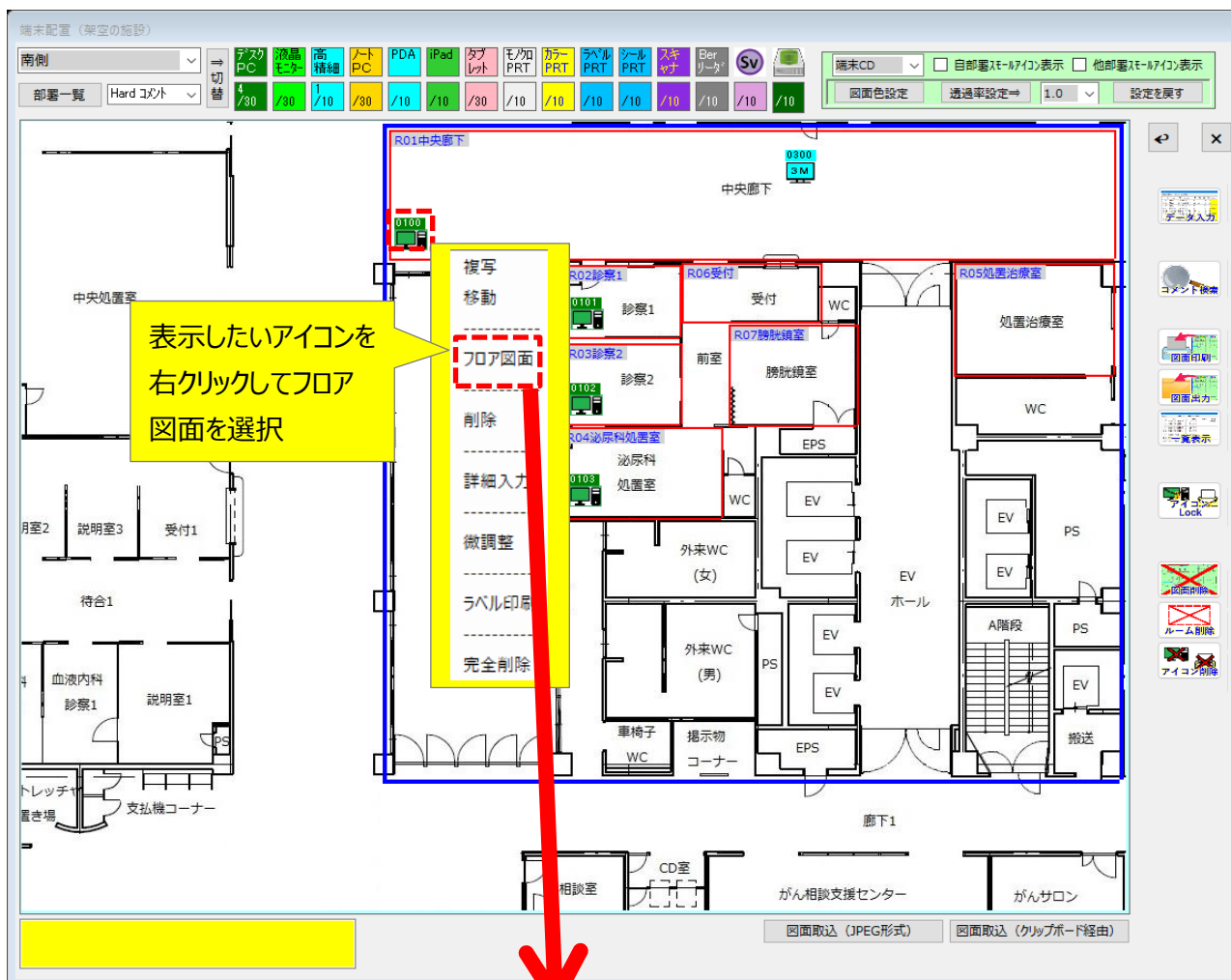



6-2 アイコン切替ボタンを押すと有線LANや無線アクセスポイントが表示される。

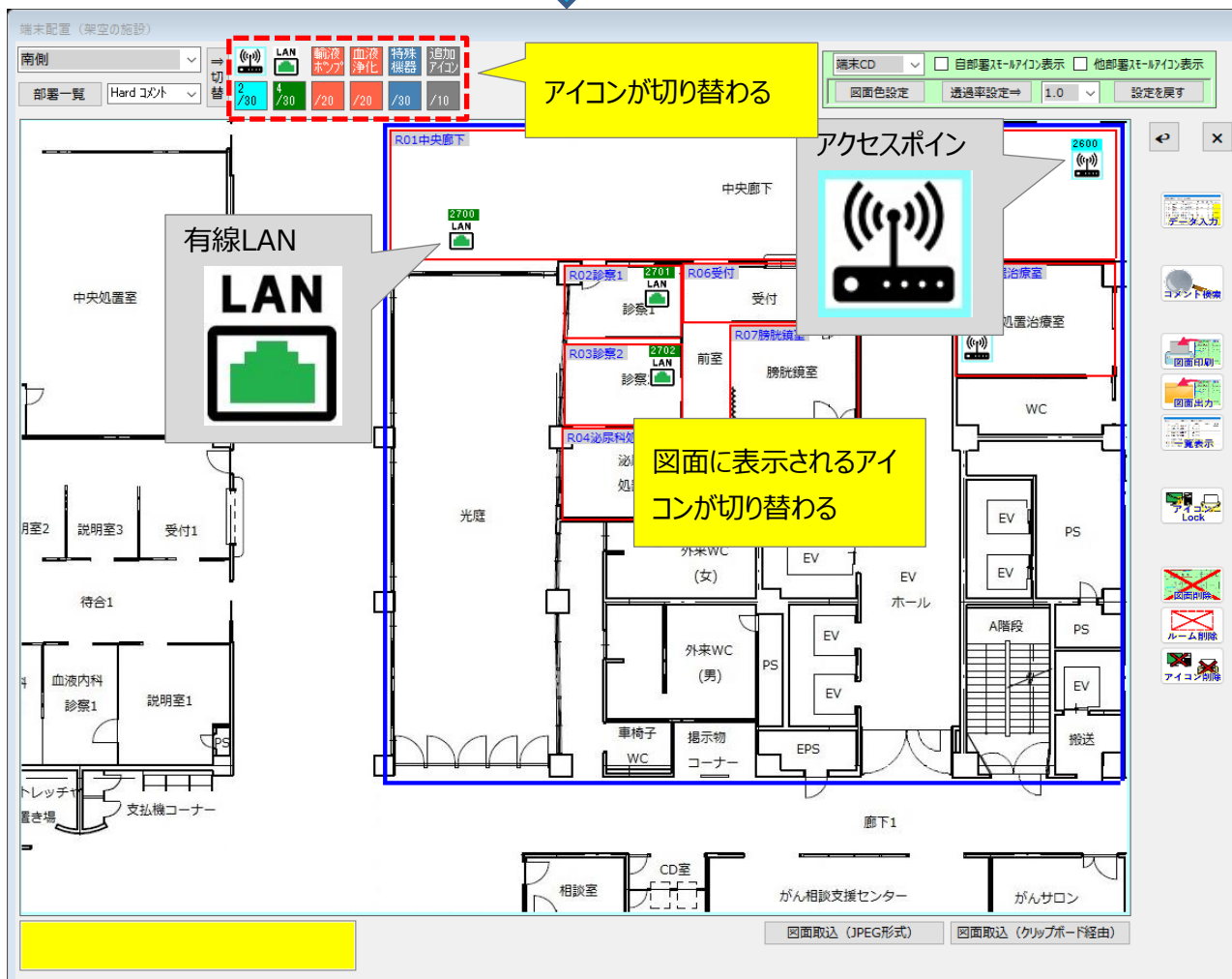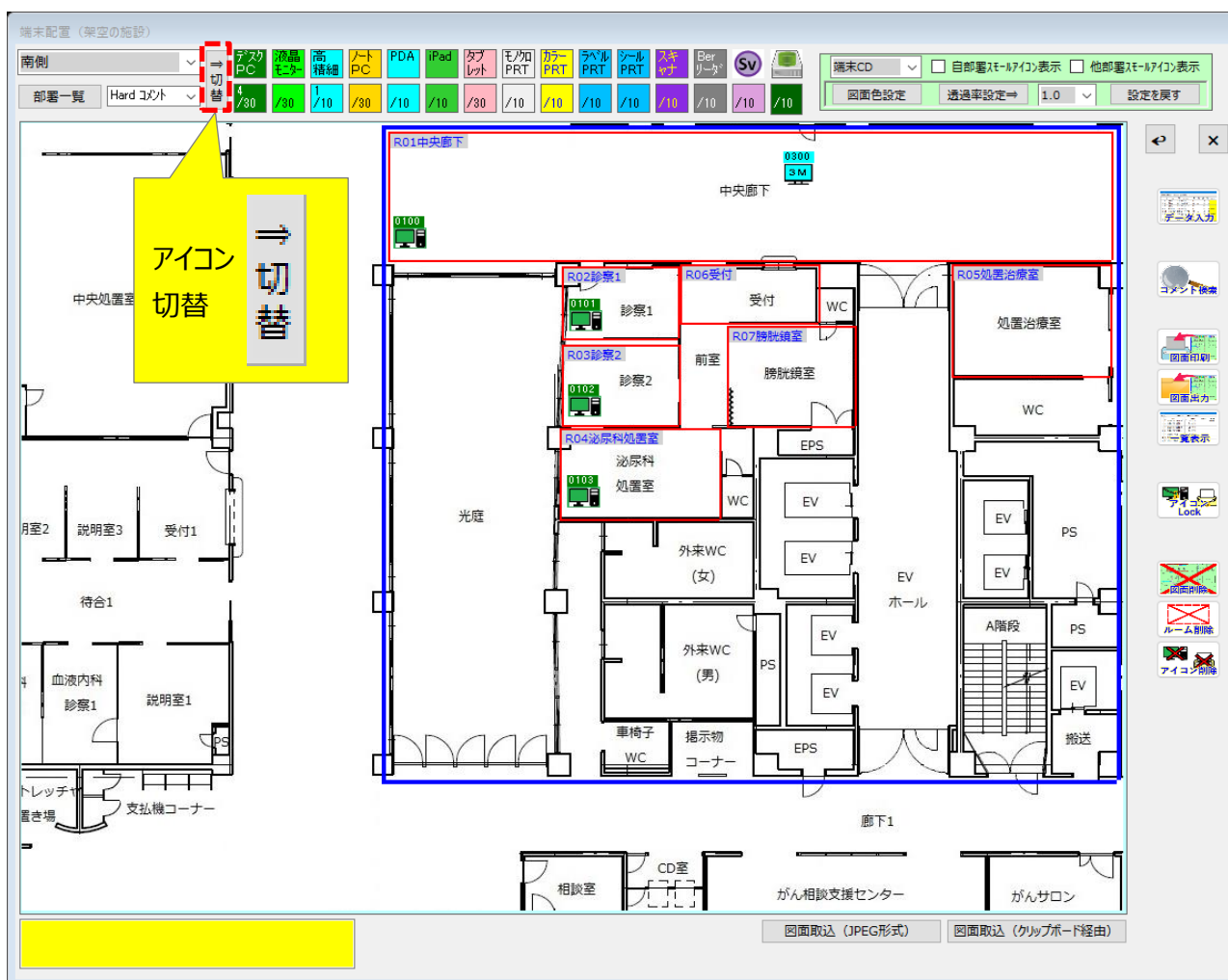


7. コメント

7-1 「コメント（アイコンへのコメント設定）」ができる。

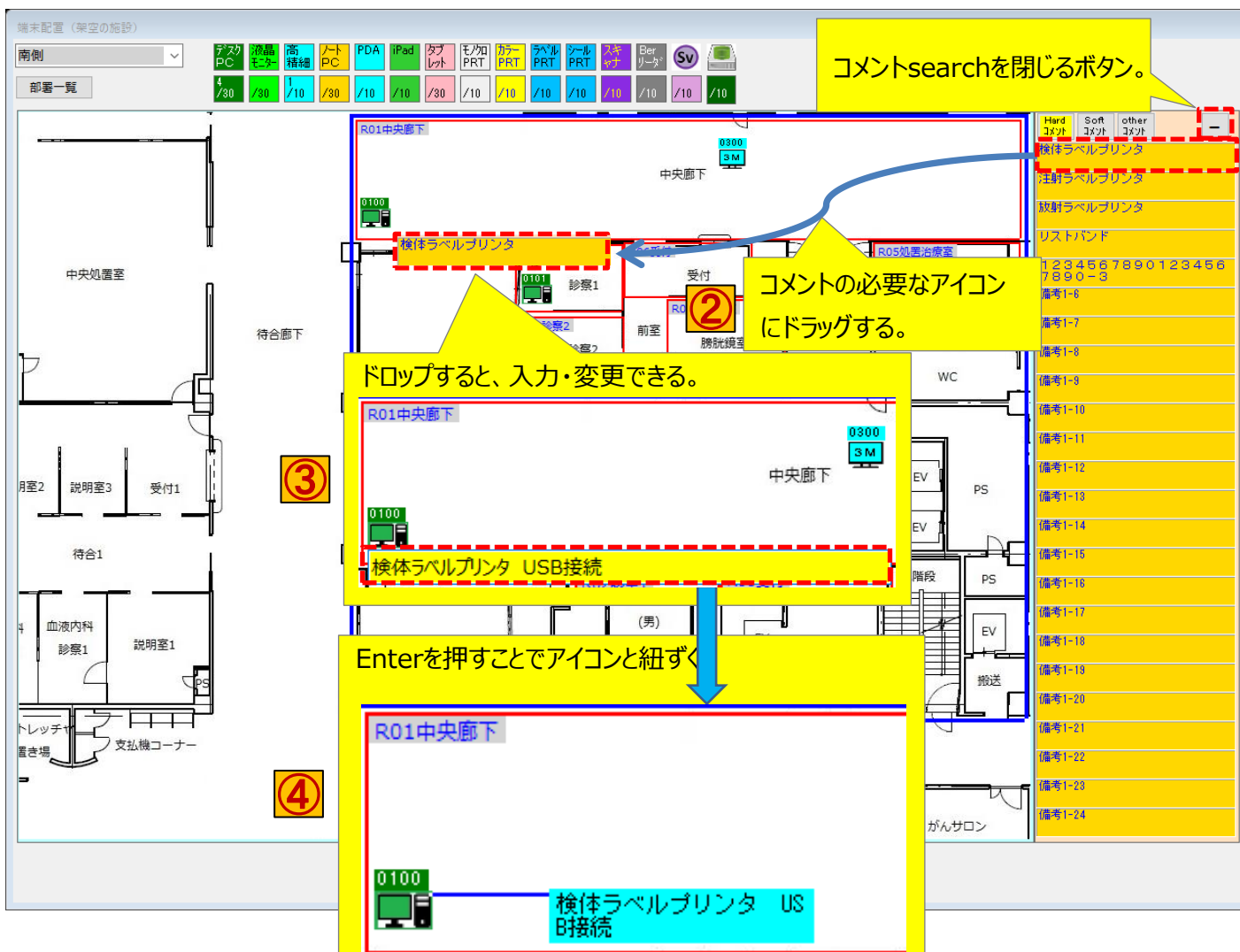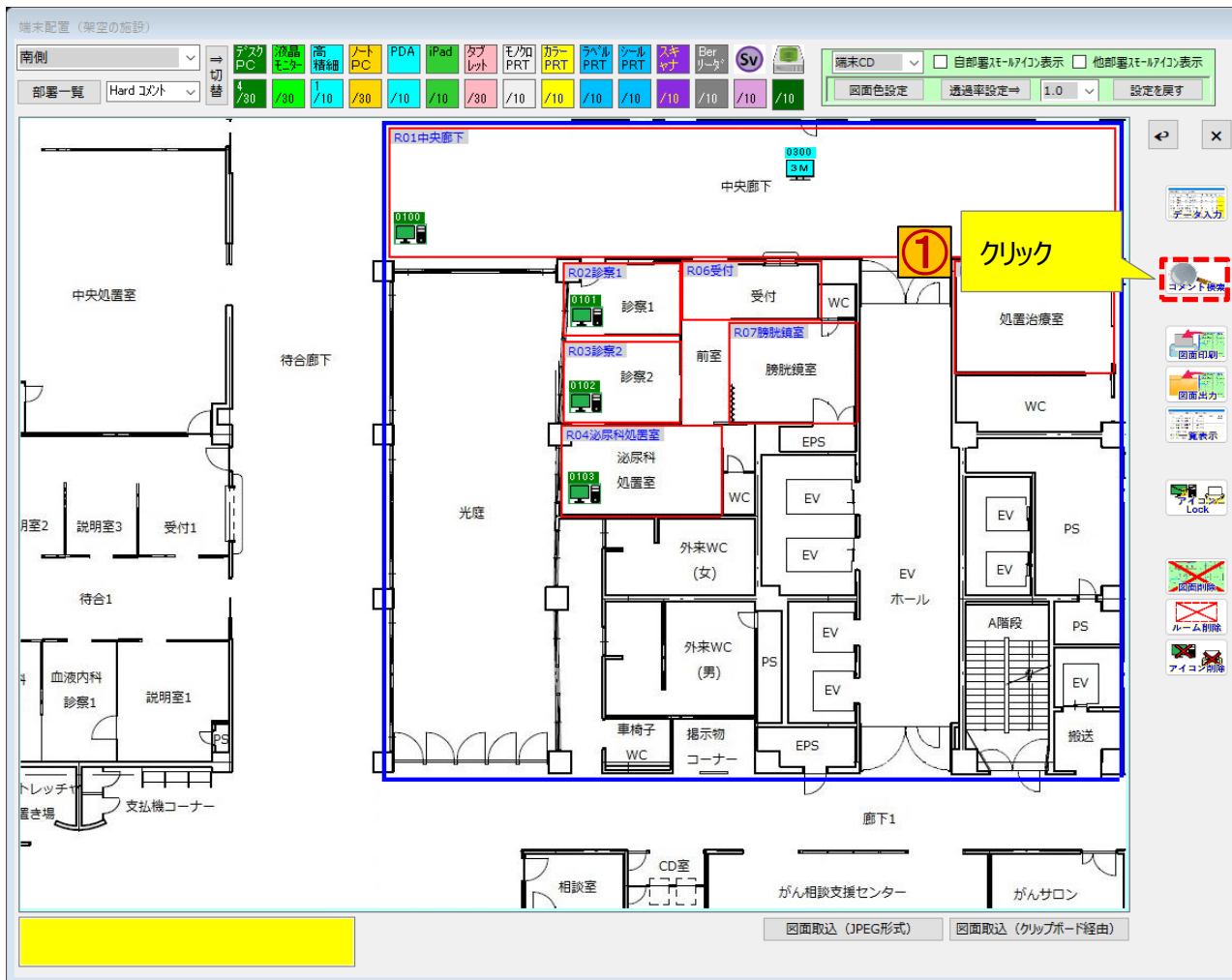

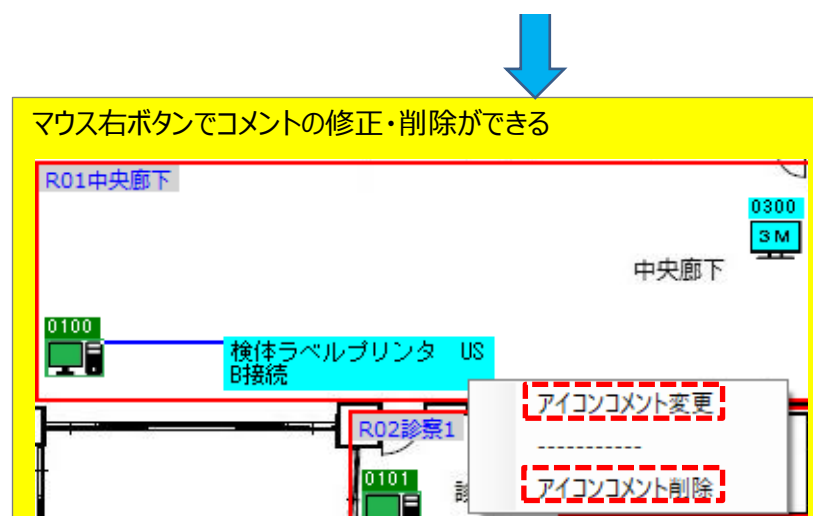


7-2「コメント設定（部署へのコメント設定）」ができる。※部署コメントは3つまで可能

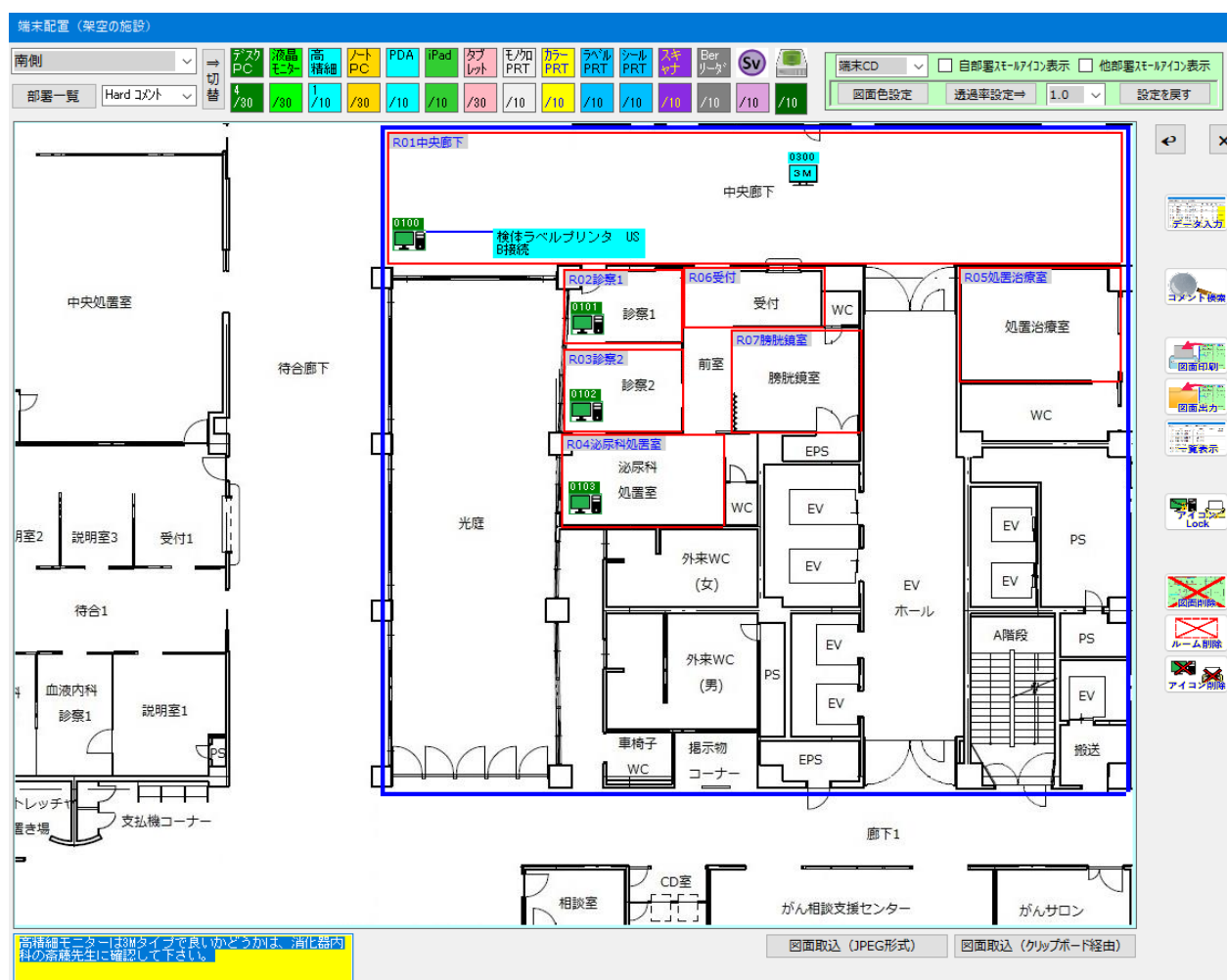


コメントを入力し、Enterを押すことで図面に展開される



マウスドラッグ・ドロップで任意の場所に置くことができる

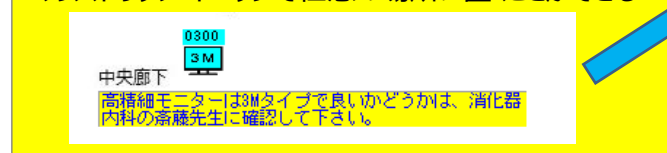

マウス右ボタンでコメントの修正・削除ができる

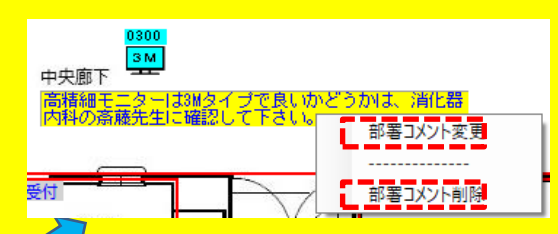

8. 図面印刷・図面出力

8-1 「図面印刷」の操作方法

① クリック

② デフォルトプリンタが表示されるが、設定されているプリンター名は選択できる

③ クリック

印刷結果を名前を付けて保存

PDF出力の場合、出力先の指定が可能

クリック

保存(S)

8-2 「図面出力」の操作方法

1 クリック

JpegOutputの出力先が初期指定される

2 クリック

ファイル名=部署コード+部署名(配置図).jpg となる

3

図面が出力される

架空の施設

9. 一覧表示

9-1 「一覧表示（端末配置一覧）」の起動方法

端末配置（架空の施設）

南側

部署一覧 Hard コスト

切替

端末CD

自部署端末アイコン表示 他部署端末アイコン表示

画面色設定 透過率設定 1.0 設定を戻す

中央処置室

待合廊下

R01中央廊下

中央廊下

0300 3M

検体ラベルプリンタ US

R02診察1

診察1

R03診察2

診察2

R04泌尿科処置室

R06受付

受付

WC

R07膀胱鏡室

膀胱鏡室

R05処置治療室

処置治療室

EPS

クリック

一覧表示

一覧表示（詳細・集計一覧）

南側

100%

アイコン切替1

詳細・集計一覧 詳細一覧 集計一覧 SUBアイコン表示

再表示 詳細出力 集計出力

ルーム コード	ルーム名	端末 コード	端末種別名	種別	種別 SUB	位置 TOP	位置 LEFT	資産番号	IPアドレス	機器モデル	導入ベンダ	使用者
1 R01	中央廊下	0100	デスクトップパソコン	PC		176	355					
2 R01	中央廊下	0300	高精細モニタ 3M	HM	H3	118	719					
3 R02	診察1	0101	デスクトップパソコン	PC		255	520					
4 R03	診察2	0102	デスクトップパソコン	PC		337	519					
5 R04	泌尿科処置室	0103	デスクトップパソコン	PC		424	518					

部署別端末種別
台数一覧表示

端末種別部署別
台数一覧表示

端末種別	端末種別 SUB	表示順	端末種別名	合計台数	消外、乳外、 形成、整形	消内、中処 置	呼内・呼 外、血内	医事、がん 相談	泌尿器、処 理室	内視、気管 支、撮影室	南側	緩和ケア
1 PC		01	デスクトップパソコン	26	5	5	5		1	6	4	
2 SM		02	デスクトップモニタ	4	1	1	1		1			
3 HM		03	高精細モニタ	2	1						1	
4 NT		04	ノートパソコン	6	1		4		1			
5 PD		05	PDA	0								
6 IA		06	iPad	1			1					
7 TB		07	タブレット	0								
8 PR		08	プリンター（モノクロ）	0								
9 CP		09	プリンター（カラー）	1	1							
10 LP		10	ラベルプリンタ	4	1					3		
11 SP		11	シールカラープリンター	0								
12 SC		12	スキャナー	3						3		
13 BR		13	バーコードリーダー	0								
14 ET		14	サーバ	0								
15 WA		15	ストレージ	0								
16			<< 総合計 >>	47	10	6	11	0	3	12	5	0

9-1-(1) 一覧表示（端末配置一覧）の各ボタン説明

この画面は「一覧表示（詳細・集計一覧）」のスクリーンショットです。以下のボタンとメニューが説明されています：

- 部署切替**：消化器・乳腺外科、消化器内科・中央処置室、呼吸器内科・外科、南側、MEセンター
- 倍率変更**：50%、60%、70%、80%、90%、100%、110%、120%、130%、140%、150%、160%、170%、180%、190%、200%
- アイコン切替**：アイコン切替1、アイコン切替2、アイコン切替3、アイコン切替4、全アイコン
- 詳細・集計・SUBアイコン表示切替**：詳細・集計一覧（選択）、詳細一覧、集計一覧、SUBアイコン表示
- 再表示**、**詳細出力**、**集計出力** ボタン
- 更新ボタン**
- EXCEL形式で出力**（2箇所）

この画面はExcelファイル「1107-南側(図面付一覧)」のスクリーンショットです。以下の内容が示されています：

- Excelのインターフェース（ファイル、ホーム、挿入、ページレイアウト、数式、データ、校閲、表示、ヘルプ、TEAM）
- ワークシート名：1階フロア-南側
- 表の1行目：1階フロア-南側
- 表の2行目：端末配置（架空の施設：1階フロア）
- 表の3行目：南側
- 表の4行目：デスクPC、液晶モニター、高精細、ノートPC、PDA、iPad、タブレット、モノカ、カラーPRT、ラベルPRT、PRT
- 表の5行目：4/30、1/30、1/10、1/30、1/10、1/30、1/10、1/10、1/10、1/10
- 図面：中央処置室、待合廊下、R01中央廊下、R02診察1、処置室、WC、処置治療室
- 処理確認ダイアログ：PNG（JPG）形式の図面を貼り付け、詳細一覧（Excelファイル）に貼り付けますか？ はい(Y)、いいえ(N)
- 青いバナー：架空の施設

事前には部署の図面を出力していれば、詳細一覧と共にExcelファイルに貼り付けることができます。

11- 1階フロア (集計) - Excel

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 ヘルプ TEAM 何をししますか

Meiryo UI 18 A A

B I U 背景色 文字色

配置 折り返して全体を表示する セルを結合して中央揃え

標準 数値 スタイル


条件付き書式 テーブルとしてセルの書式設定 セルのスタイル 挿入

A1 1階フロア

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	1階フロア													
2	No.	端末種別	端末種別SUB	表示順	端末種別名	合計台数	消外、乳外、形成、整形	消内、中処置	呼内・呼外、血内	医事、がん相談	泌尿器、処理室	内視、気管支、撮影室	南側	緩
3	1	PC		01	デスクトップパソコン	26	5	5	5		1	6	4	
4	2	SM		02	デスクトップモニタ	4	1	1	1		1			
5	3	HM		03	高精細モニタ	2	1						1	
6	4	NT		04	ノートパソコン	6	1		4		1			
7	5	PD		05	P D A	0								
8	6	IA		06	i P a d	1			1					
9	7	TB		07	タブレット	0								
10	8	PR		08	プリンター (モノクロ)	0								
11	9	CP		09	プリンター (カラー)	1	1							
12	10	LP		10	ラベルプリンタ	4	1					3		
13	11	SP		11	シールカラープリンター	0								
14	12	SC		12	スキャナー	3						3		
15	13	BR		13	バーコードリーダー	0								
16	14	ET		14	サーバ	0								
17	15	WA		15	ストレージ	0								
18	16				<< 総合計 >>	47	10	6	11	0	3	12	5	

10. IconLock

10-1 「アイコンLock」は図面に配置されたアイコンの移動・削除を不可にする。

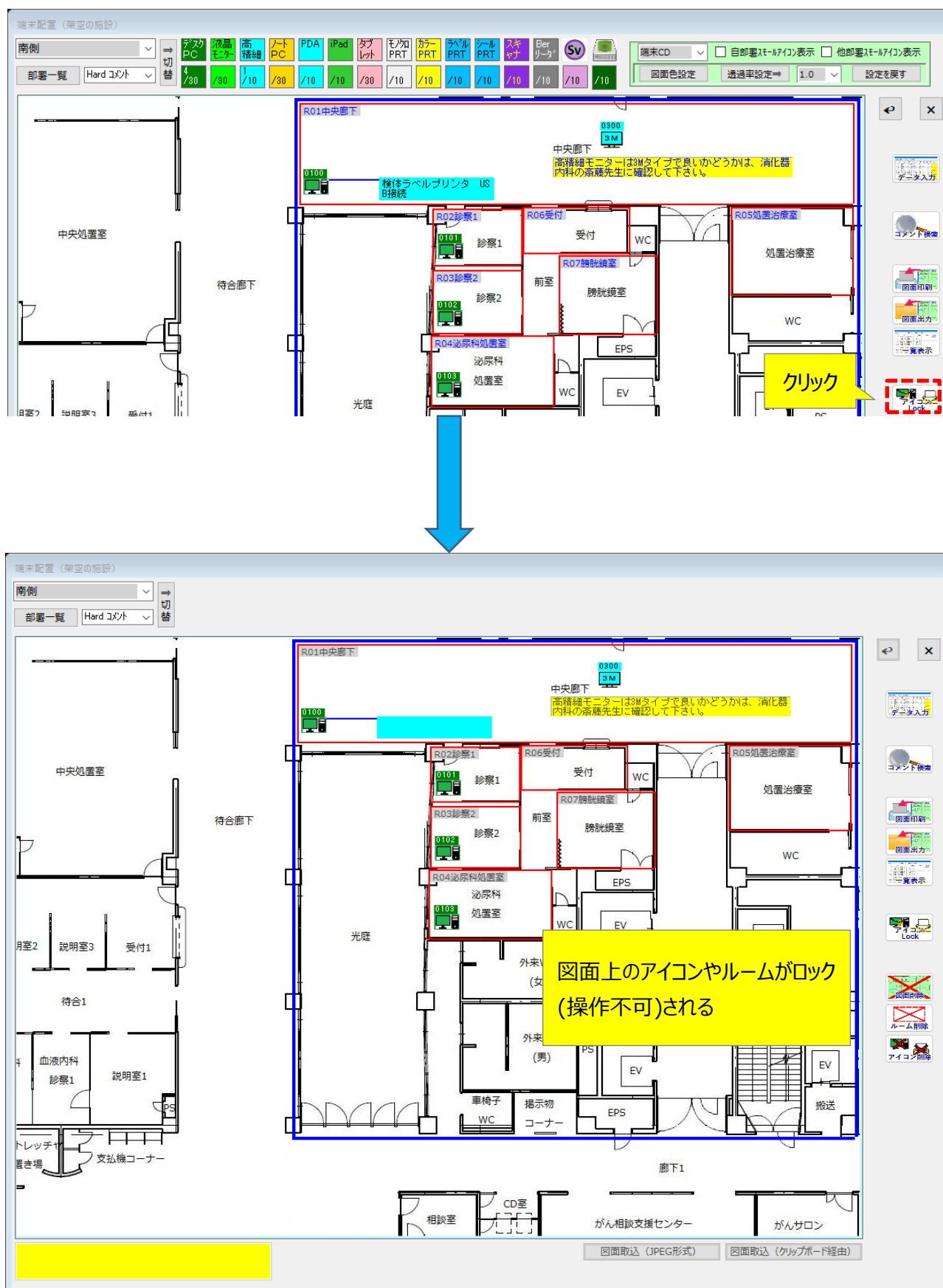

10-1-(1) アイコンLockをした部署は端末配置画面にて「Lock」と表示される。

端末配置（架空の施設）

図面印刷 (PDF出力可) 図面出力 (PNG出力)

前の棟 1階フロア 2階フロア 次の棟

	Lock	コード	部署名	表示順	図面名称	部署KB	排他状況	操作端末
▶ 1		1101	消化器外、乳腺外、形成、整形	1101	¥Diagram-1101.jpg	11		DESKTOP-E28Q6E2
2		1102	消化器内科、中央処置室	1102	¥Diagram-1102.jpg	11		DESKReadOnly_ E2
3		1103	呼吸内・外科、血液内科	1103	¥Diagram-1103.jpg	11		suface
4		1104	受付、医事科、がん相談室	1104	¥Diagram-1104.jpg	11		DESKTOP-MNAGHP0
5		1105	泌尿器科、処置治療室	1105	¥Diagram-1105.jpg	11		USER-PC1
6		1106	内視鏡、気管支鏡、撮影室	1106	¥Diagram-1106.jpg	11		suface
7	Lock	1107	南側	1107	¥Diagram-1107.jpg	11		MyComputer
8		1108	緩和ケア	1108	¥Diagram-1108.jpg	11		MyComputer

Lockの文字が表示される

マウス右ボタンで「Lock解除」ができる

部署変更

Lock解除
ReadOnly解除

行クリア

11. 図面・ルーム・アイコン削除

11-1 「図面削除」を行うと、その部署に設定されている図面情報はクリアされる。
但し、図面データ（Jepg）は削除されない。

図面削除ボタンを押すと
図面の削除ができる

クリック

はい(Y) いいえ(N)

クリック

OK キャンセル

この場合、「南側」に設定されている図面情報がクリアされる。部署の図面情報がクリアされたため、別の図面をここに持ってくることができ、Room、アイコンの再利用ができる。

11-2 「ルーム削除」を行うと、その部署に設定されているルーム情報は"R00"に戻る。

ルーム削除ボタンを押すとルームの削除ができる。

全てのルームの削除を行う場合は「はい(Y)」を押して下さい。
削除をしない場合は「いいえ(N)」を押して下さい。

はい(Y) いいえ(N)

部署コード「1107」のルームを全て削除します。
また、端末配置に設定されているルームを「R99」に戻します。
削除すると元の状態に戻すことはできません。

OK キャンセル

部署からルームが全て削られ、除端末配置一覧の「部署別端末種別台数一覧」のルームコード、ルーム名が初期化される。

ルームコード	ルーム名	端末コード	端末種別名	種別
1 R99		0100	デスクトップパソコン	PC
2 R99		0101	デスクトップパソコン	PC
3 R99		0300	高精細モニタ 3 M	HM
4 R99		0102	デスクトップパソコン	PC
5 R99		0103	デスクトップパソコン	PC

11-3 「アイコン削除」を行うと、その部署に設定されているアイコン(端末)情報は削除される。

端末配置 (架空の施設)

南側

部署一覧 Hard コント

端末CD

自部署アイコン表示 他部署アイコン表示

画面色設定 透過率設定 1.0 設定を戻す

0100 0101 0102 0103

0300 3M

機体ラベルプリンタ US B接続

アイコン削除ボタンを押すとアイコンの削除ができる。

DevArrangeExec

この部署の全てのアイコンを完全削除する場合は「はい(Y)」を押して下さい。
削除をしない場合は「いいえ(N)」を押して下さい。

はい(Y) いいえ(N)

部署からアイコンが全て削除され、端末配置一覧の「部署別端末種別台数一覧」の端末情報が全て削除される。

一覧表示 (詳細・集計一覧)

南側 100% アイコン切替1

● 詳細・集計一覧 ○ 詳細一覧 ○ 集計一覧


ルーム コード	ルーム名	端末 コード	端末種別名	種 別	種別 SUB	位置 TOP	位置 LEFT	資産番

12. 棚卸管理


12-1「棚卸管理」を選択します。




12-1-(1) フロア図面を選択してダブルクリックします。

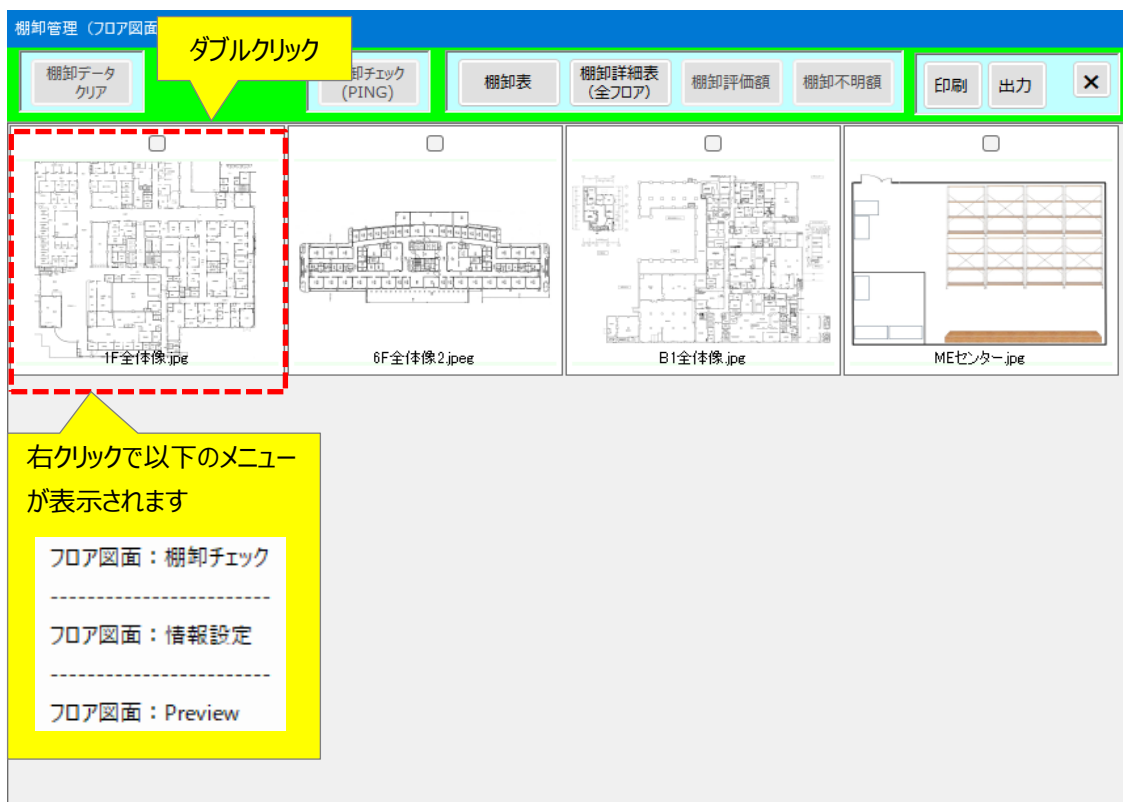


12-1-(2) 棚卸管理(フロア図面:棚卸チェック)が開きます。各ボタンの説明は以下の通りです。

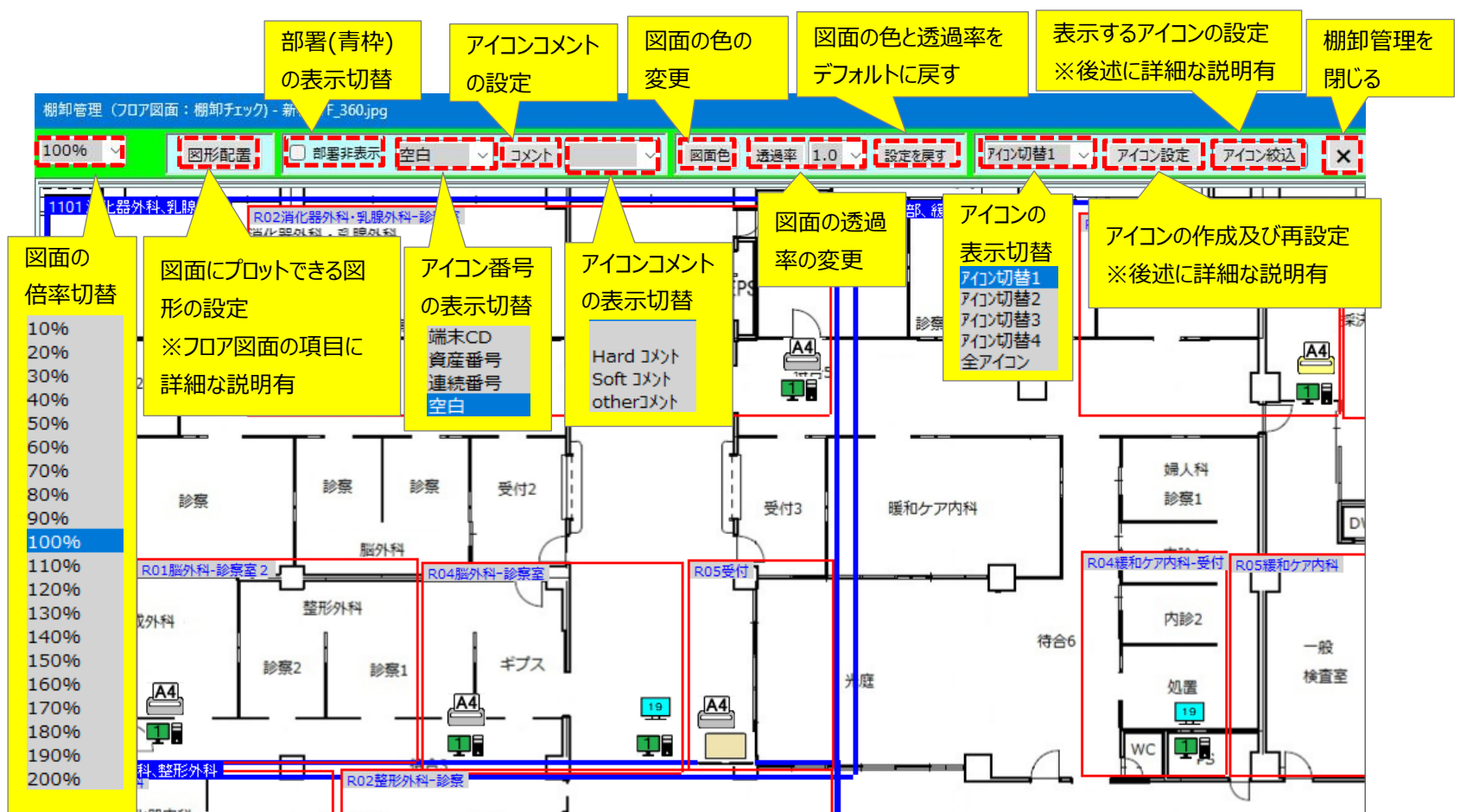


12-1-(3)「アイコン絞込」はフロア図面に表示するアイコンの種類を設定することができます。

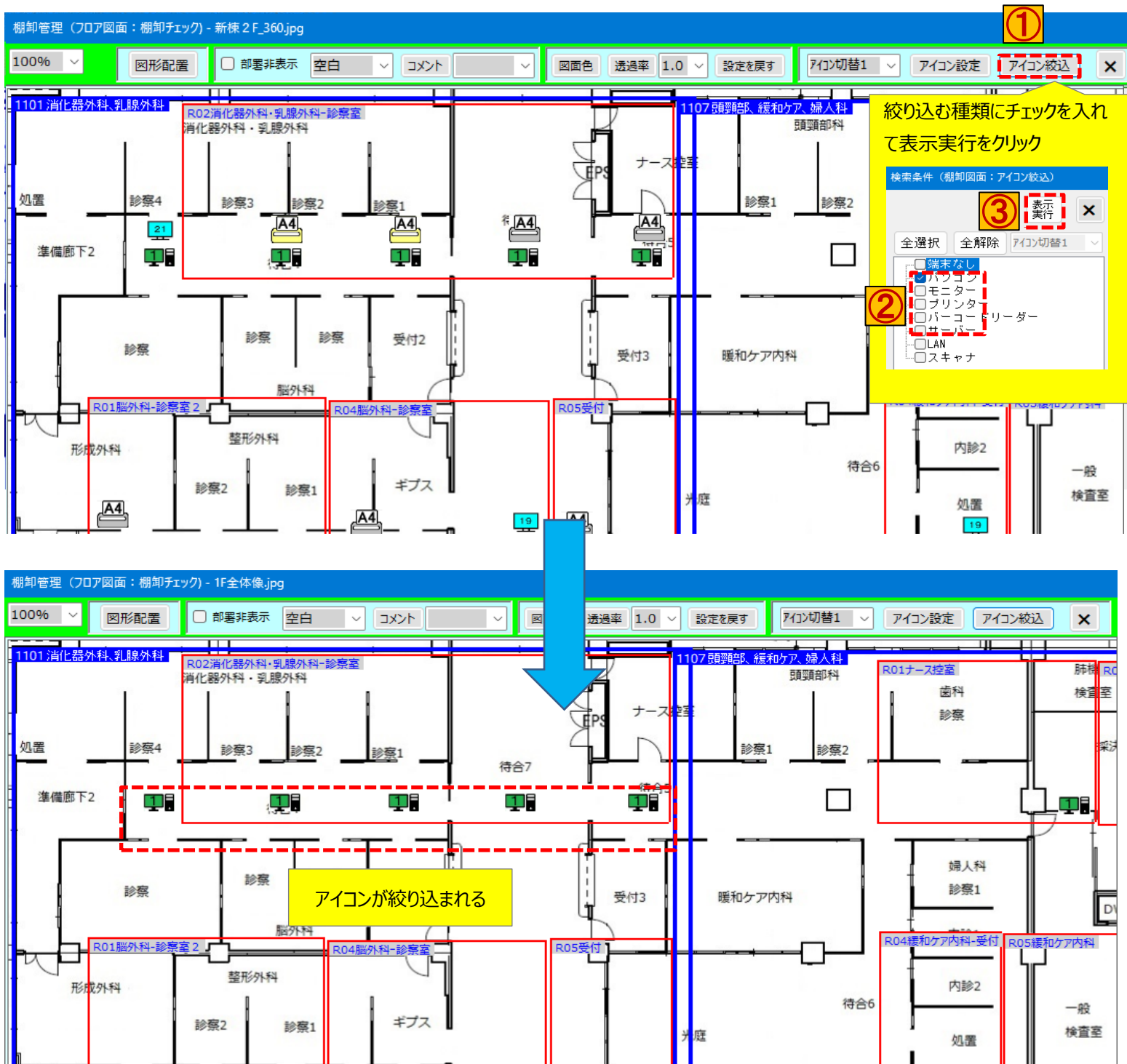

12-1-(4)「アイコン設定」は新規にアイコンを作成、もしくはプロット済みのアイコンにドラッグ&ドロップすることで設定し直すことができます。

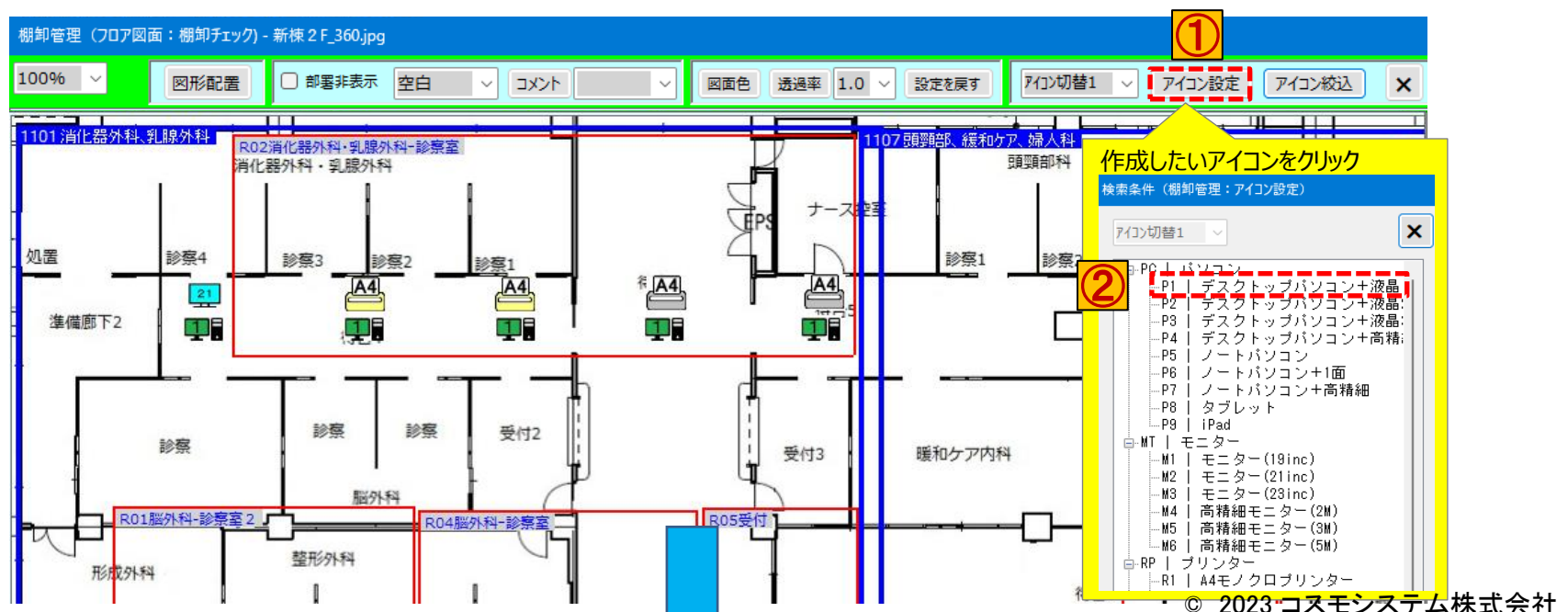

12-1-(5) アイコンをCtrl+クリック+マウスムーブで移動することができます。

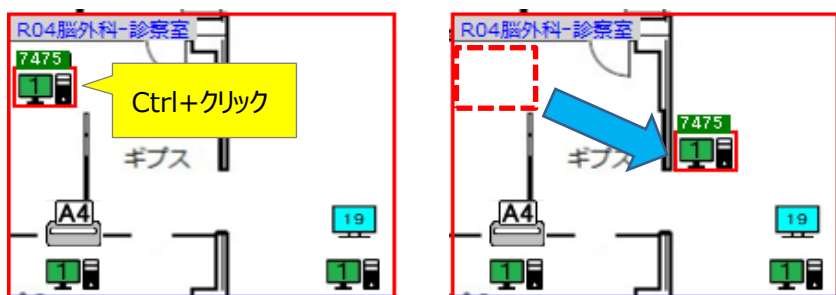

12-2 アイコンをクリックすると「機器登録画面」が表示されます。各項目の説明は以下の通りです。

機器登録画面を登録して閉じる

登録、入替登録切替 ※後述に詳細な説明有

部署コード

機器登録画面を登録せず閉じる

登録

● 機器Ck(棚卸)登録 ○ 機器の入替登録

1101

資産番号 7475

参照IP 192.168.003.051

↓新資産番号をスキャン又は入力してください

IP入力 192.168.003.051

ゲートウェイ

前回入力したIP


IP、ゲートウェイの入力 (下三桁を入力してエンターすれば自動入力されます)

新資産番号の入力

端末情報	0111 PC P1 デスクトップパソコン+液晶1面
機器区分	
メーカー名	
機器モデル	
設置場所 1	
設置場所 2	

機器の詳細情報 ※後述に詳細な説明有

12-2-(1) 「機器Ck(棚卸)登録」をチェックして登録すると、内容が反映されます。

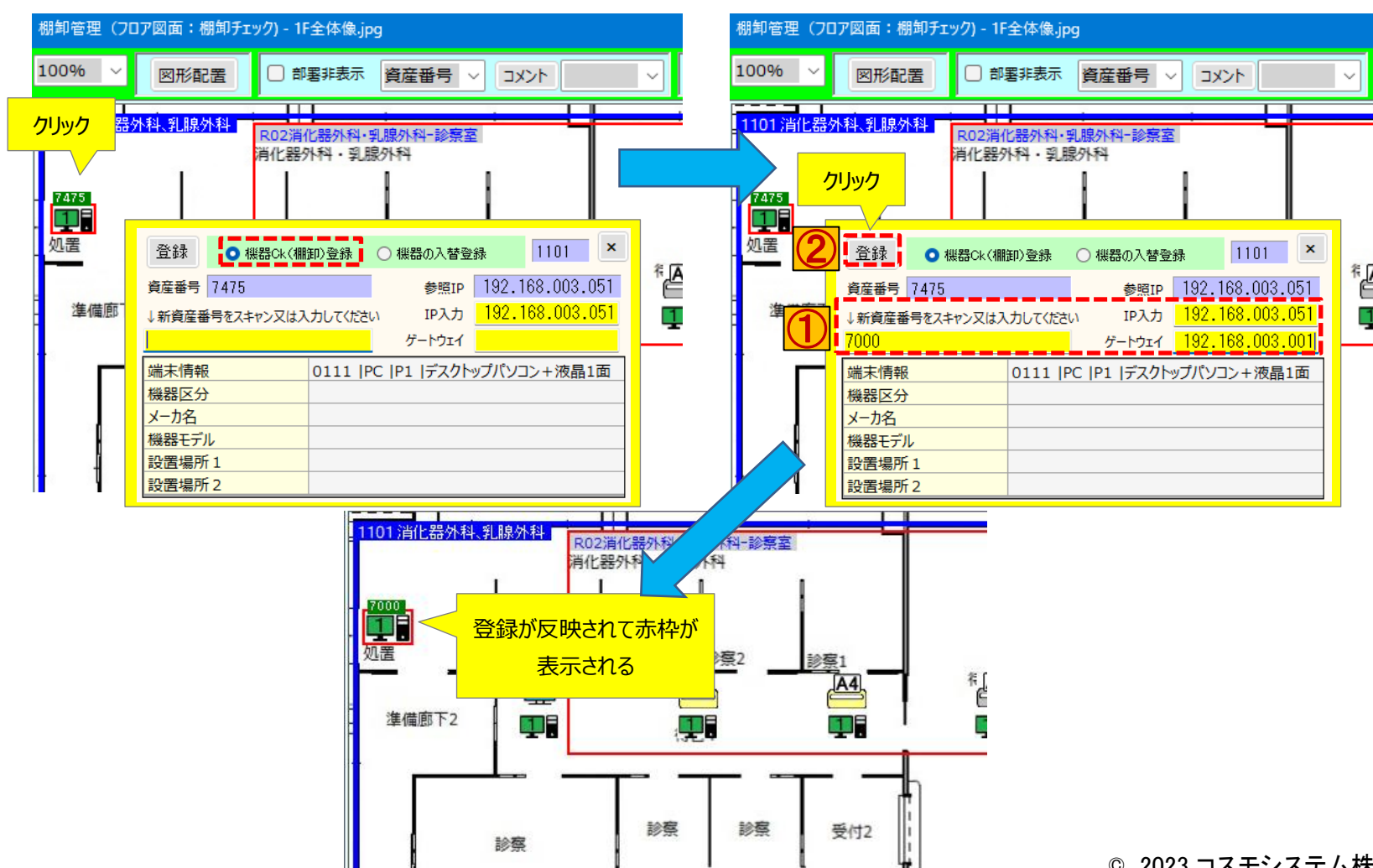

12-2-(2)「機器の入替登録」をチェックして登録すると、資産番号が入れ替わります。

棚卸管理 (フロア図面：棚卸チェック) - 1F全体像.jpg

100% 図形配置 部署非表示 資産番号 コメント

1101 消化器外科・乳腺外科 R02消化器外科・乳腺外科-診察室

① 入替元の機器

登録 機器Ok(棚卸)登録 機器の入替登録 1101

資産番号 7000 参照IP 192.168.003.051

↓新資産番号をスキャン又は入力してください IP入力 192.168.003.051

ゲートウェイ 192.168.003.001

端末情報 0111 |PC |P1 |デスクトップパソコン+液晶1面

機器区分

メーカー名

機器モデル

設置場所 1

設置場所 2

② 入替元の機器の資産番号を入力して登録

登録 機器Ok(棚卸)登録 機器の入替登録 1101

資産番号 7000 参照IP

↓新資産番号をスキャン又は入力してください IP入力

ゲートウェイ

端末情報 0200 |MT |M2 |モニター(21inc)

機器区分

メーカー名

機器モデル

設置場所 1

設置場所 2

③ 資産番号が入れ替わる

④ 入替登録後、入替元の機器の資産番号はリセットされる

登録 機器Ok(棚卸)登録 機器の入替登録 1101

資産番号 7001 参照IP 192.168.003.051

↓新資産番号をスキャン又は入力してください IP入力 192.168.003.051

ゲートウェイ 192.168.003.001

端末情報 0111 |PC |P1 |デスクトップパソコン+液晶1面

機器区分

メーカー名

機器モデル

設置場所 1

設置場所 2

12-2-(3)「機器の詳細情報」をクリックすると項目ごとに検索画面が表示され、変更することができます。

登録 機器Ok(棚卸)登録 機器の入替登録 1101

資産番号 7001 参照IP

↓新資産番号をスキャン又は入力してください IP入力

ゲートウェイ

端末情報 0113 |PC |P1 |デスクトップパソコン+液晶1面

機器区分 デスクトップ PC

メーカー名 富士通

機器モデル ESPRIMO D588/T

設置場所 1 DI室

設置場所 2 ナース控室

クリックで変更可能

設置場所、メーカー名など検索

設置場所、メーカー名など検索

設置場所、メーカー名など検索

機器区分

メーカー名

機器モデル

選択しているフロアの場合が表示される

設置場所、メーカー名など検索

中央棟1階

DI室

ナース控室

医事科

一般検査室

会計

緩和ケア内科

形成外科

血液内科

呼吸器外科

呼吸器内科

更衣室

歯科診療

消化器外科

消化器内科

整形外科

機器の詳細情報が変更される

登録 機器Ok(棚卸)登録 機器の入替登録 1101

資産番号 7001 参照IP

↓新資産番号をスキャン又は入力してください IP入力

ゲートウェイ

端末情報 0113 |PC |P1 |デスクトップパソコン+液晶1面

機器区分 ノートPC

メーカー名 京セラ

機器モデル ESPRIMO D587/S

設置場所 1 医事科


設置場所 2 緩和ケア内科

13. 棚卸表

13-1 「棚卸管理」を選択します。



13-1-(1) フロア図面にチェックを入れて「棚卸表」を選択します。

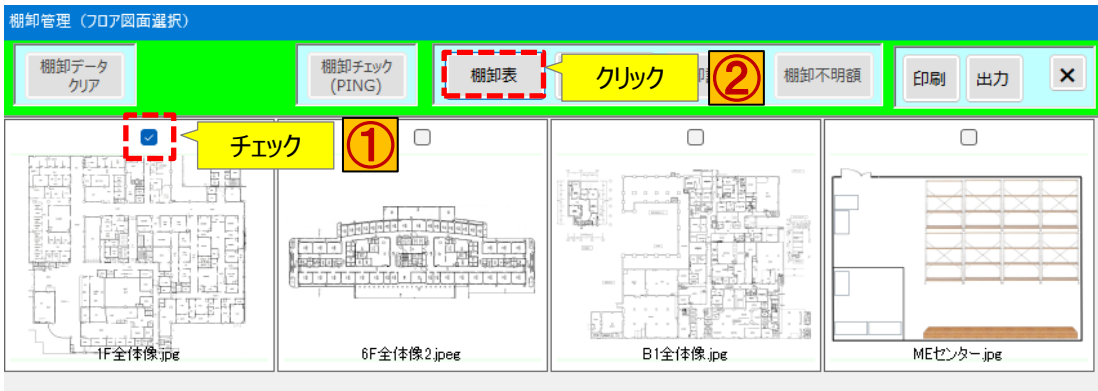

13-1-(2) 選択したフロア図面の棚卸表が表示されます。

棚卸詳細表・棚卸集計表

1 1-フロア全ての部署

100%

アイコン切替1

● 棚卸詳細表・棚卸集計表

○ 棚卸詳細表

○ 棚卸集計表

再表示

詳細出力


集計出力

✕

	部署コード	部署名	種別	端末種別名	新設置場所	資産番号	棚卸CK	機器種別	メーカー名	機器モデル	パターン	アプリ1	IPアドレス	デフォルトゲートウェイ	ディスプレイ1	ディスプレイ2
1	1101	消化器外科、乳腺外科	RP	A4モノクロプリンター								50900 1 15...				
2	1101	消化器外科、乳腺外科	RP	A4モノクロプリンター								50900 1 15...				
3	1101	消化器外科、乳腺外科	RP	A4モノクロプリンター								50900 1 15...				
4	1101	消化器外科、乳腺外科	RP	A4モノクロプリンター								50900 1 15...				
5	1101	消化器外科、乳腺外科	RP	A4カラープリンター								50900 1 15...				
6	1101	消化器外科、乳腺外科	RP	A4カラープリンター								50900 1 15...				
7	1101	消化器外科、乳腺外科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0			50100 1 17...	
8	1101	消化器外科、乳腺外科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0			50100 1 17...	
9	1101	消化器外科、乳腺外科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0			50100 1 17...	
10	1101	消化器外科、乳腺外科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0			50100 1 17...	
11	1101	消化器外科、乳腺外科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面		7476	*					50900 1 15...				
12	1101	消化器外科、乳腺外科	MT	モニター(19inc)		7001	*									
13	1101	消化器外科、乳腺外科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0			50100 1 17...	
14	1101	消化器外科、乳腺外科	MT	モニター(21inc)		7000	*									
15	1101	消化器外科、乳腺外科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0			50100 1 17...	
16	1101	消化器外科、乳腺外科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0			50100 1 17...	
17	1101	消化器外科、乳腺外科	PC	ノートパソコン+1面								50320 1 0				
18	1101	消化器外科、乳腺外科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面	医事科	7001	*	ノートPC	京セラ	ESPRIMO D587/S						
19	1102	消化器内科、中央処置室	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0				

No	種別	種別SUB	端末種別名	合計台数 台数	合計台数 資産数	合計台数 棚卸数	消化器外科、 乳腺外科 台数	消化器外科、 乳腺外科 資産数	消化器外科、 乳腺外科 棚卸数	消内、中処 置 台数	消内、中処 置 資産数	消内、中処 置 棚卸数	呼吸器内科・ 外科、血液 内科 台数	呼吸器内科・ 外科、血液 内科 資産数	呼吸器内科・ 外科、血液 内科 棚卸数	医事、がん 相談 台数	医事、がん 相談 資産数	医事、がん 相談 棚卸数	泌尿器、処 理室 台数	泌尿器、処 理室 資産数	泌尿器、処 理室 棚卸数
1	01	PC	パソコン	94	2	2	10	2	2	4			8			5			3		
2	02	MT	モニター	90	2	2	2	2	2	2			2						3		
3	03	RP	プリンター	46			6			2			2			2					
4	04	BR	バーコードリーダー	15									2			1					
5	05	SV	サーバー	19												2					
6	06	LN	LAN	10									1								
7	07	CS	スキャナ	12									1			1					
8			<< 総合計 >>	286	4	4	18	4	4	8			16			11			6		

13-2「棚卸詳細表(全フロア)」を選択します。

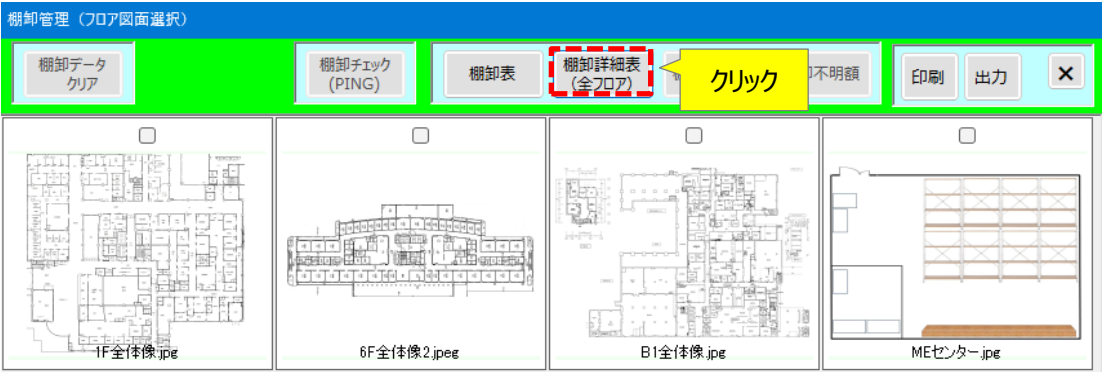

13-2-(1) 棚卸詳細表(全フロア)が表示されます。



棚卸詳細表 (全フロア)														
100		棚卸詳細表 (全フロア)										検索条件	詳細出力	X
	部署コード	部署名	種別	端末種別名	新設置場所	資産番号	棚卸CK	機器種別	メーカー名	機器モデル	パターン	アプリ1	IPアドレス	デフォルト
1	1101	消化器外科、乳腺外科	RP	A4モノクロプリンター								50900 1 15...		
2	1101	消化器外科、乳腺外科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0		
3	1101	消化器外科、乳腺外科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0		
4	1101	消化器外科、乳腺外科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0		
5	1101	消化器外科、乳腺外科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0		
6	1101	消化器外科、乳腺外科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面		7476	*					50900 1 15...		
7	1101	消化器外科、乳腺外科	RP	A4モノクロプリンター								50900 1 15...		
8	1101	消化器外科、乳腺外科	RP	A4カラープリンター								50900 1 15...		
9	1101	消化器外科、乳腺外科	RP	A4カラープリンター								50900 1 15...		
10	1101	消化器外科、乳腺外科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0		
11	1101	消化器外科、乳腺外科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0		
12	1101	消化器外科、乳腺外科	MT	モニター(19inc)		7001	*					50900 1 15...		
13	1101	消化器外科、乳腺外科	RP	A4モノクロプリンター								50320 1 0		
14	1101	消化器外科、乳腺外科	PC	ノートパソコン+1面								50900 1 15...		
15	1101	消化器外科、乳腺外科	RP	A4モノクロプリンター								50320 1 0		
16	1101	消化器外科、乳腺外科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50900 1 15...		
17	1101	消化器外科、乳腺外科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面	医事科	7001	*	ノートPC	京セラ	ESPRIMO D587/S				
18	1101	消化器外科、乳腺外科	MT	モニター(21inc)		7000	*							
19	1102	消化器内科、中央処置室	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0		
20	1102	消化器内科、中央処置室	RP	ラベルプリンター										
21	1102	消化器内科、中央処置室	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0		
22	1102	消化器内科、中央処置室	RP	A4モノクロプリンター								50900 1 15...		
23	1102	消化器内科、中央処置室	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0		
24	1102	消化器内科、中央処置室	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0		
25	1102	消化器内科、中央処置室	MT	高精細モニター(2M)										
26	1102	消化器内科、中央処置室	MT	高精細モニター(2M)										
27	1103	呼吸内科・外科、血液内科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0		
28	1103	呼吸内科・外科、血液内科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0		
29	1103	呼吸内科・外科、血液内科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0		
30	1103	呼吸内科・外科、血液内科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0		
31	1103	呼吸内科・外科、血液内科	MT	モニター(19inc)										
32	1103	呼吸内科・外科、血液内科	MT	モニター(19inc)										
33	1103	呼吸内科・外科、血液内科	RP	A4カラープリンター								50900 1 15...		
34	1103	呼吸内科・外科、血液内科	RP	A4カラープリンター								50900 1 15...		
35	1103	呼吸内科・外科、血液内科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0		
36	1103	呼吸内科・外科、血液内科	PC	デスクトップパソコン+液晶1面								50320 1 0		

14. フロア図面


14-1 「棚卸管理」を選択します。




14-1-1 (1) フロア図面を右クリックして「フロア図面・Preview」を選択します。

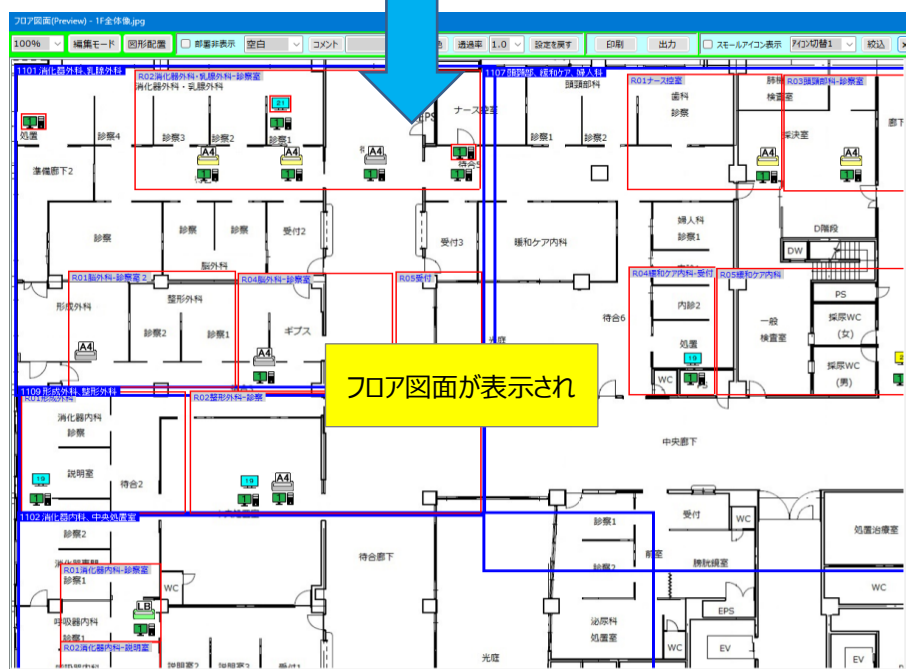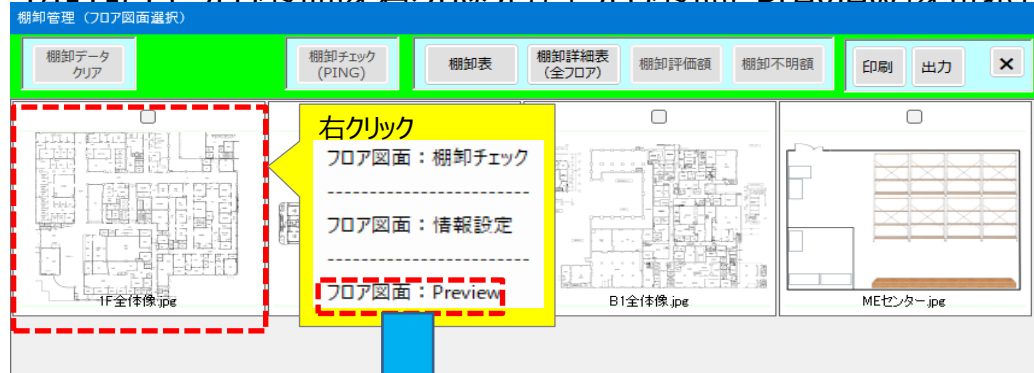


14-2「図形配置」は図面の任意の場所に各種図形をプロットすることができます。

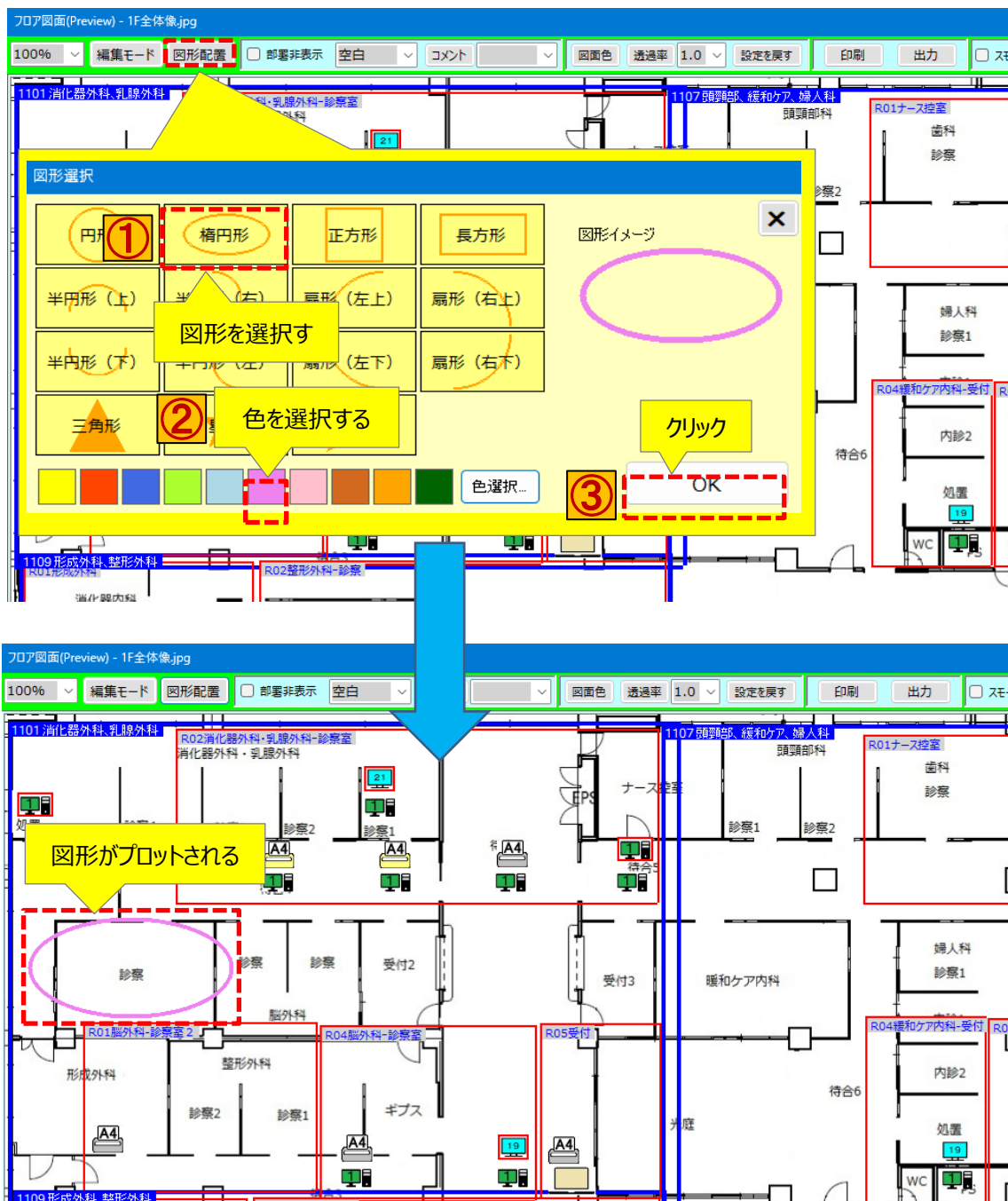

14-2-(1) プロット後の図形はクリック+ドラッグ&ドロップで移動が可能です。

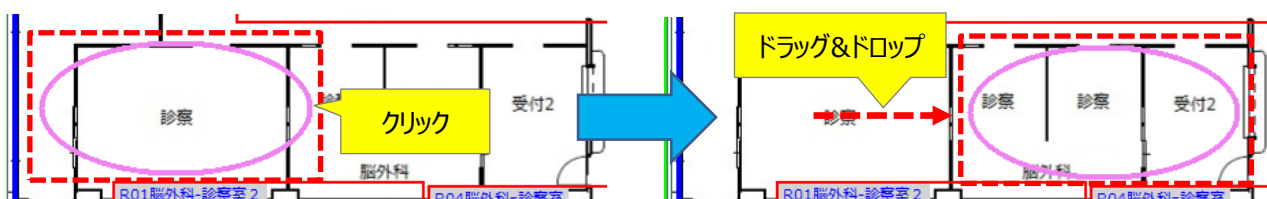

14-2-(2) プロット後の図形はクリックで大きさ変更が可能です。

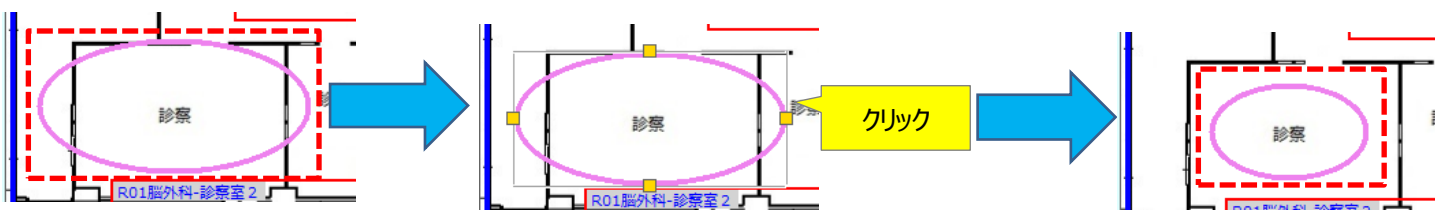

15. その他

15-1 ルームを後から設定する。



15-1-(1) 端末配置一覧の「部署別端末種別配置一覧」に設定される。

ルームコード	ルーム名	端末コード	端末種別名
1 R01	中央廊下	0100	デスクトップパソコン
2 R01	中央廊下	0300	高精細モニター 3M
3 R02	診察1	0101	デスクトップパソコン
4 R03	診察2	0102	デスクトップパソコン
5 R04	泌尿科処置室	0103	デスクトップパソコン
6 R99		0400	ノートパソコン

ルームコード	ルーム名	端末コード	端末種別名
1 R01	中央廊下	0100	デスクトップパソコン
2 R01	中央廊下	0300	高精細モニター 3M
3 R02	診察1	0101	デスクトップパソコン
4 R03	診察2	0102	デスクトップパソコン
5 R04	泌尿科処置室	0103	デスクトップパソコン
6 R08	光庭	0400	ノートパソコン


15-2 フロア名の変更

端末配置 (架空の施設)


前の棟 1階フロア 2階フロア 次の棟

表示順	図面名称	部署KB	排除状況	操作端末
1	消化器外、乳腺外、形成、整形	11		DESKTOP-E28Q6E2
2	中央処置室	11		DESKTOP-E28Q6E2
3	血液内科	11		surface
4	がん相談室	11		DESKTOP-MNAGHP0
5	泌尿科処置治療室	11		USER-PC1
6	内視鏡、気管支鏡、撮影室	11		surface
7	南側	11		MyComputer
8	緩和ケア	11		MyComputer

15-3 コメント名の変更

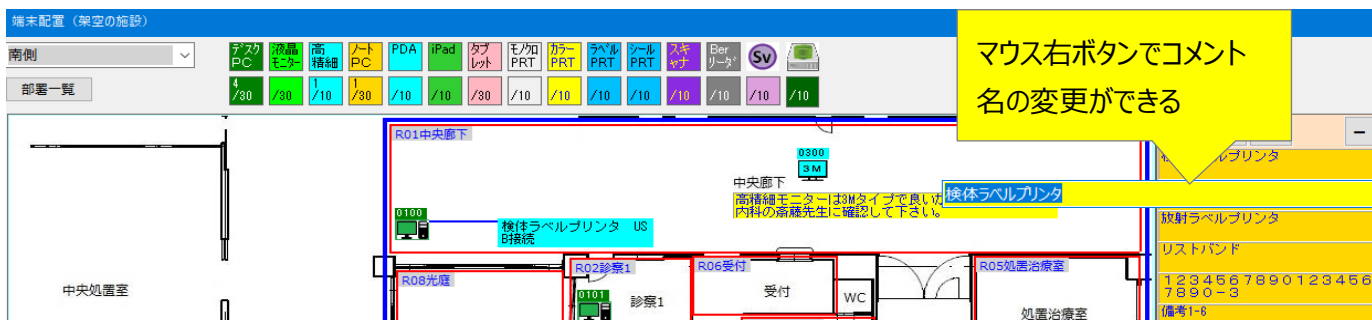

15-4 排除狀況

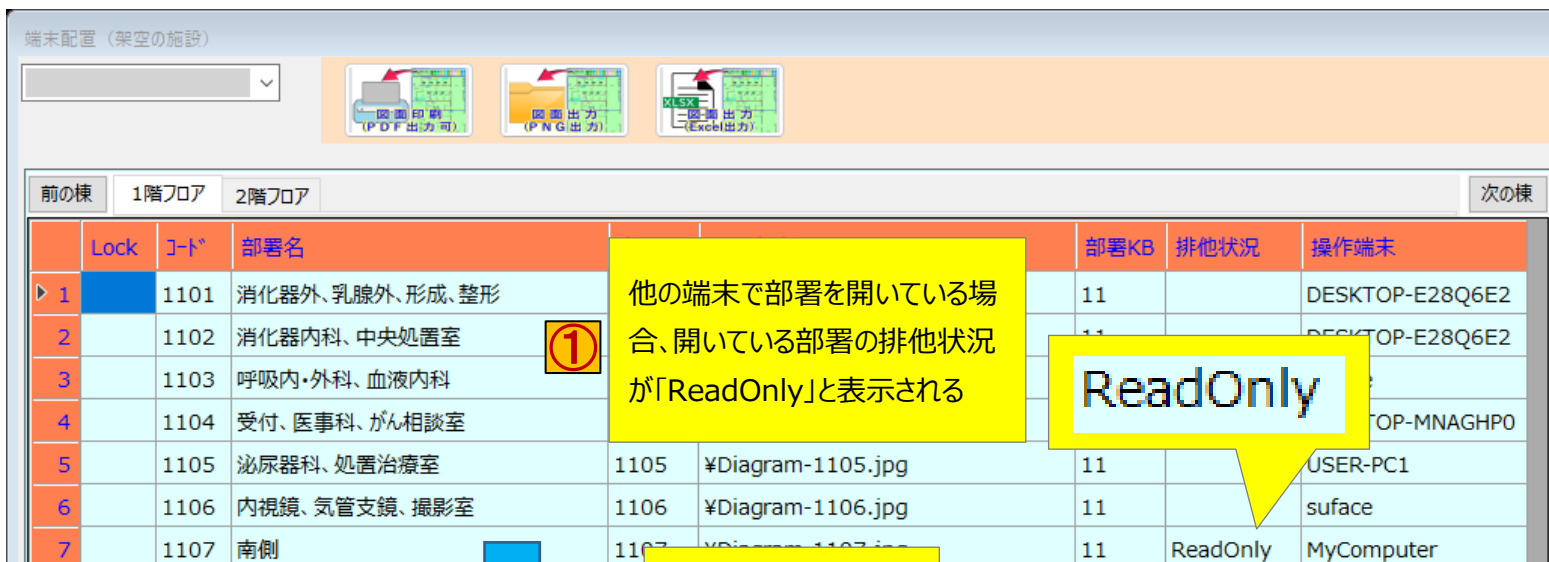

15-5 詳細一覧検索

端末配置

詳細一覧

台数集計

Data取込

Data出力

移設図面

棚卸管理

資産管理

保守管理

検索条件

資産番号 % %

IPアドレス % %

アイコン切替1

全選択 全解除

AND OR

全選択 全解除

☐ 部署なし

☒ 1階フロア

☐ 2階フロア

☐ 第2庁舎1階

☐ 第2庁舎2階

☐ 4棟 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

☐ 端末なし

☒ デスクトップパソコン

☐ デスクトップモニタ

☐ 高精細モニタ

☐ ノートパソコン

☐ PDA

☐ iPad

☐ タブレット

☐ プリンター (モノクロ)

☐ プリンター (カラー)

☐ ラベルプリンタ

☐ シールカラープリンター

☐ スキャナー

☐ バーコードリーダー

☐ サーバ

☐ ストレージ

表示実行

検索したい部署と端末にチェックを入れて画面右上の表示実行ボタンで検索できる。

詳細一覧

100

☒ 部署・ルーム順 ☐ 資産番号順 ☐ IPアドレス順

	部署コード	部署名	ルームコード	ルーム名	端末コード	種別	種別SUB	端末種別名	資産番号	導入ベンダ	機器モ
1	1101	消化器外、乳...	R01	整形外科	0105	PC		デスクトップパソコン	SISAN1234		
2	1101	消化器外、乳...	R02	消化器・乳腺...	0100	PC		デスクトップパソコン	SISAN1236		
3	1101	消化器外、乳...	R02	消化器・乳腺...	0102	PC		デスクトップパソコン			
4	1101	消化器外、乳...	R02	消化器・乳腺...	0103	PC		デスクトップパソコン			
5	1101	消化器外、乳...	R02	消化器・乳腺...	0104	PC		デスクトップパソコン			
6	1102	消化器内科、...	R02	消化器	0100	PC		デスクトップパソコン			
7	1102	消化器内科、...	R02	消化器	0101	PC		デスクトップパソコン			
8	1102	消化器内科、...	R02	消化器	0102	PC		デスクトップパソコン			
9	1102	消化器内科、...	R02	消化器	0103	PC		デスクトップパソコン			
10	1102	消化器内科、...	R99		0104	PC		デスクトップパソコン			
11	1103	呼吸内・外科...	R01	呼吸器内・外科	0100	PC		デスクトップパソコン			
12	1103	呼吸内・外科...	R01	呼吸器内・外科	0101	PC		デスクトップパソコン			
13	1103	呼吸内・外科...	R01	呼吸器内・外科	0102	PC		デスクトップパソコン			
14	1103	呼吸内・外科...	R01	呼吸器内・外科	0103	PC		デスクトップパソコン			
15	1103	呼吸内・外科...	R99		0104	PC		デスクトップパソコン			

検索結果が表示される。

15-6 台数集計

端末配置

詳細一覧

台数集計

Data取込

Data出力

移設図面

棚卸管理

資産管理

保守管理

台数集計 (部署別種別)

100


アイコン切替1

☐ SUBアイコン表示

	棟	部署名	デスクトップパソコン	デスクトップモニタ	高精細モニタ	ノートパソコン	PDA	i P
1		<< 総合計 >>	34	13	2	18	0	
2	1階フロア	消外、乳外、形成、整形			1	1		
3		消内、中処置						
4		呼内・呼外、血内				4		
5		医事、がん相談						
6		泌尿器、処理室				1		
7		内視、気管支、撮影室						

各部署に配置している端末の集計が表示される。

15-7 チェックボックス各種操作

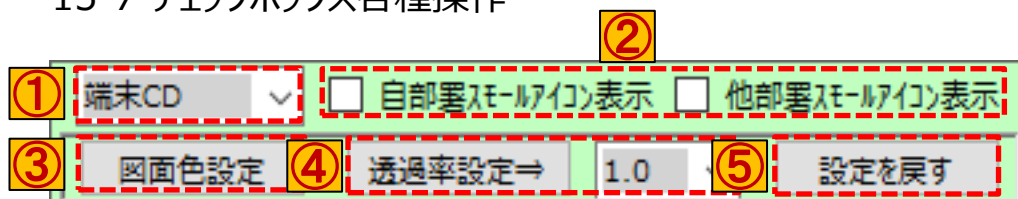

≪詳細説明≫



① 端末コード切替

アイコンのコードの表示を切り替えることができる。




② 自・他部署スモールアイコン表示切替

自部署(枠内)もしくは他部署(枠外)のスモールアイコンの表示を切り替えることができる。

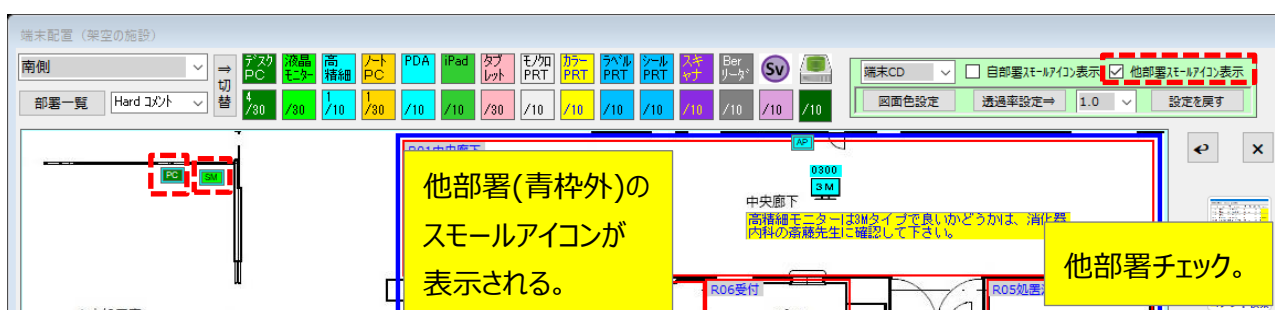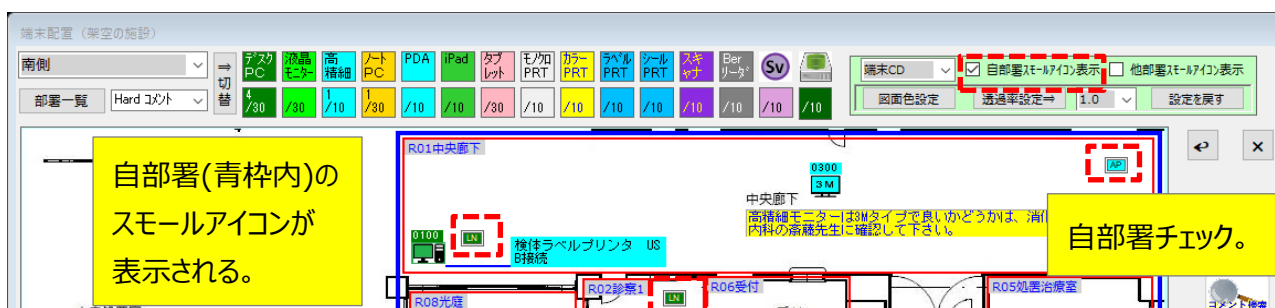



③ 図面色設定

図面の色を変えることができる。

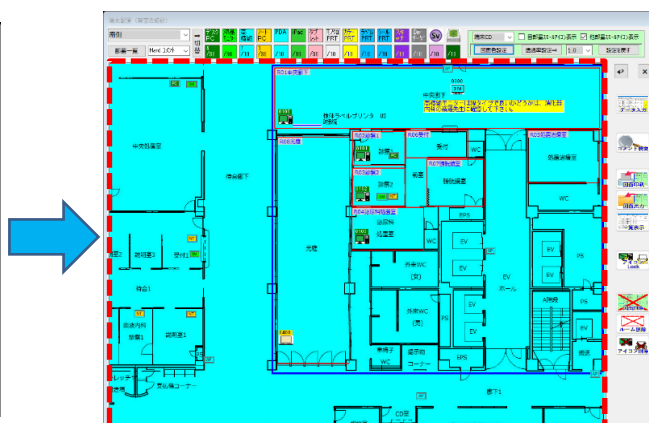

④透過率設定

図面の透過率を0～1倍まで変えることができる。

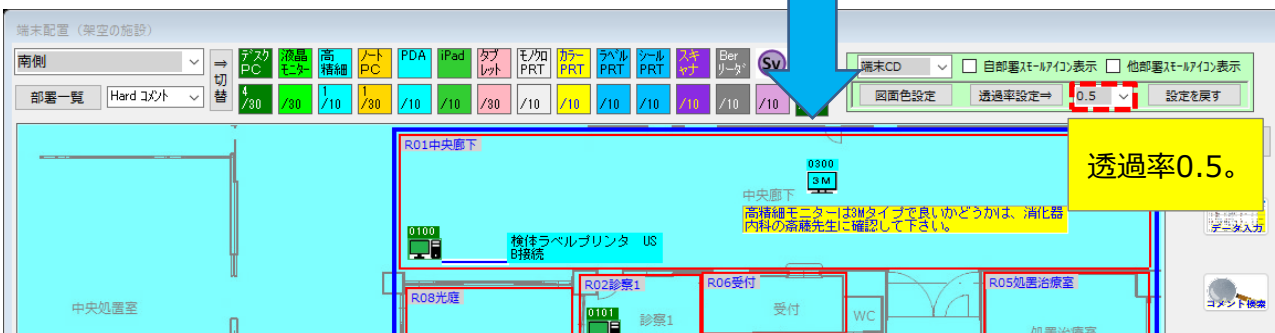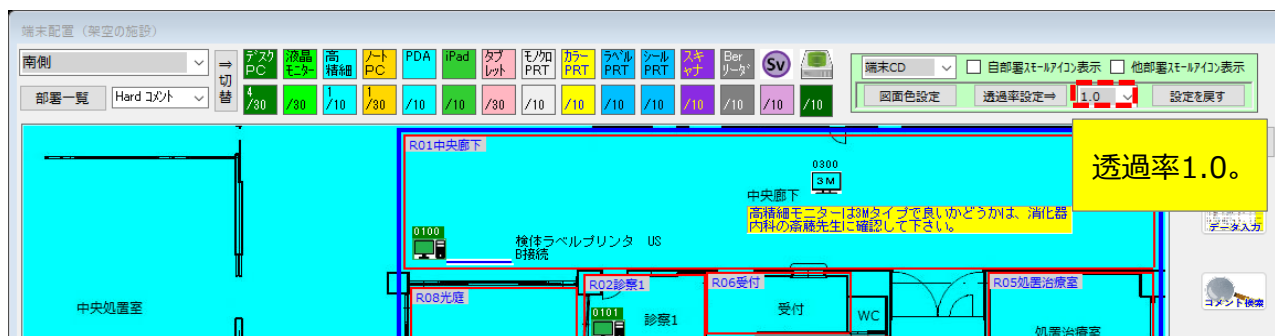

⑤設定を戻す

設定を初期状態に戻す。



【完璧な'はいち君HP】

<https://perfect-haichi.com/>

【完璧な'はいち君お問い合わせ】

✉cosmo_perfect@perfect-haichi.com

コスモシステム株式会社

<https://cosmo-sy.com>